

KaVo ProXam 3DQ

Návod k použití
3D snímkování



CS

Výrobce, zprostředkovatel sestavení a dovozce nesou odpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a funkčnost zařízení pouze tehdy, pokud:

- Instalaci, kalibraci, změny a úpravy provádí kvalifikovaní oprávnění pracovníci.
- Elektroinstalace je provedena dle patřičných požadavků, například v souladu s normou IEC 60364.
- Zařízení je používáno ve shodě s návodem k použití.

Společnost Planmeca zastává politiku trvalého vývoje produktů. Ačkoli je vynaloženo veškeré úsilí, aby byla dokumentace k produktu stále aktuální, tuto publikaci nelze považovat za neomylnou z hlediska aktuálních specifikací. Vyhrazuji si právo na změny bez předchozího upozornění.

COPYRIGHT PLANMECA

Číslo publikace 1.015.2894 Revision 1

Vydáno 22. března 2023

Anglický originál publikace:

KaVo ProXam 3DQ, 3D Instructions for use

Číslo publikace 1.015.1242 Revision 1

Obsah

1	Úvod	1
1.1	Účel použití.....	1
1.2	Prostředí použití.....	2
2	Související dokumentace	3
3	Symbyly na štítcích na produktu	4
4	Bezpečnostní opatření	6
4.1	Hlášení vážných nehod.....	9
5	Zapnutí rentgenového systému	10
5.1	Zapnutí rentgenového přístroje.....	10
5.2	Zapnutí PC pro 3D rekonstrukci.....	10
6	Hlavní části	11
6.1	Celkový pohled na rentgenový systém.....	11
6.2	Celkový pohled na rentgenový přístroj.....	12
6.3	Senzor.....	13
6.4	Rentgenka.....	13
6.5	Opěrky pacienta.....	14
6.5.1	Opěrky hlavy (varianta A nebo B).....	14
6.5.2	Opěrky brady.....	15
6.6	Expoziční tlačítko.....	15
6.7	Nouzový vypínač.....	16
6.8	Dotyková obrazovka.....	16
6.9	PC aplikace ProTouch.....	20
6.10	Ovládací prvky polohování pacienta.....	22
6.10.1	Posun rentgenového přístroje nahoru/dolů.....	22
6.10.2	Polohovací joystick.....	23
6.10.3	Posun snímaného objemu nahoru/dolů.....	23
6.10.4	Otevření/uzavření spánkových opěrek.....	24
7	Programy přístroje KaVo ProXam 3DQ	25
7.1	3D Dentála.....	25
7.2	3D Ucho Nos Krk.....	25
8	3D expozice pacienta	26
8.1	Příprava rentgenového systému.....	26
8.1.1	Připojení a odpojení snímače.....	26
8.1.2	Upevnění opěrek pacienta.....	29
8.1.3	Příprava programu Romexis.....	34
8.2	Příprava pacienta.....	34
8.3	Výběr nastavení expozice.....	34
8.3.1	Výběr programu.....	35
8.3.2	Výběr velikosti pacienta.....	35
8.3.3	Výběr průměru a výšky snímaného objemu.....	36
8.3.4	Výběr polohy objemu.....	36
8.3.5	Výběr strany čelisti.....	37
8.4	Polohování pacienta.....	38
8.4.1	Výběr pacientovy vstupní polohy.....	38

8.4.2	Polohování hlavy pacienta.....	38
8.5	Výběr expozičních hodnot.....	39
8.5.1	Výběr rozlišení snímku.....	39
8.5.2	Výběr ultra nízké dávky (ULD).....	40
8.5.3	Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici.....	41
8.6	Výběr korekce pohybu pacienta.....	42
8.7	Úprava polohy objemu.....	43
8.7.1	Vertikální přesun snímaného objemu (Z laser).....	44
8.7.2	Horizontální posun snímaného objemu (lasery X a Y).....	45
8.8	Pořízení průzkumného snímku nebo 2D pohledu (LAT, PA nebo LAT-PA).....	47
8.9	Pořízení 3D expozice.....	51
9	Nastavení.....	54
9.1	Uživatelská nastavení.....	54
9.1.1	Jazyk (1100).....	54
9.1.2	Datum a čas (1200).....	55
9.1.3	Provozní nastavení (1300).....	58
9.1.4	Nastavení sítě (1400).....	61
9.1.5	Zkušební procedury (1500).....	62
9.2	Nastavení programů.....	64
9.2.1	Programy (2100).....	64
9.2.2	Funkce programu (2200).....	65
9.2.3	Licence (2300).....	66
9.2.4	Obnova továrního nastavení (2500).....	67
9.3	Karta About (O přístroji).....	68
9.3.1	Informace o součástech (4100).....	68
9.3.2	Archiv (4200).....	68
9.3.3	Registrace produktu (4300).....	69
10	Zprávy nápovědy.....	70
11	Chybové zprávy.....	74
12	Čištění a dezinfekce.....	75
12.1	Opěrky pacienta, madla pro pacienta a dotyková obrazovka.....	75
12.2	Ostatní povrchy.....	78
13	Servis.....	80
14	Záruční podmínky.....	81
15	Likvidace.....	82
16	Technické údaje.....	83

1 Úvod

Tento Návod k použití popisuje, jak pořizovat 3D expozice.

Tento Návod k použití je platný pro přístroj KaVo ProXam 3DQ.



POZNÁMKA

Tento Návod k použití je platný pro verze softwaru 3.9.14 nebo novější. Tato verze softwaru je kompatibilní s aplikací Romexis verze 6.4.2 nebo novější. Pro ověření verze softwaru vašeho rentgenového přístroje vyberte Settings > About > 4100 Component Information > ProMax SW version (Nastavení > O přístroji > 4100 Informace o součástech > Verze ProMax SW).

Rentgenový přístroj využívá počítačovou tomografii s kuželovým paprskem (CBCT) k vytvoření trojrozměrných (3D) rentgenových snímků. Během zpracování dvojrozměrných (2D) rentgenových snímků lze využít panoramatické, kefalometrické a projekčně-radiografické techniky.

Rentgenové snímky mohou být použity k vyšetření:

- Dentomaxilofaciální oblast
- Uši, nos a krk
- Krční páteř
- Ostatní části kraniální anatomie

Pro ukládání, zobrazování a úpravu snímků je vyžadováno PC s nainstalovanou aplikací Romexis.

Před použitím přístroje se ujistěte, že jste si plně osvojili odpovídající způsoby ochrany proti záření a tyto pokyny. Váš rentgenový přístroj nemusí být vybaven všemi volitelnými funkcemi popsány v tomto návodu. Seznam dostupných licencí je uveden v části "Licence (2300)" na str. 66.

Návod zahrnuje volitelné možnosti, které nemusí být dostupné ve všech zemích.

POZNÁMKA

Rentgenový přístroj smí používat pouze profesionální uživatelé.

KaVo ProXam je obchodní název přístroje Planmeca ProMax, vyrobeného a distribuovaného společností KaVo.

1.1 Účel použití

Rentgenový přístroj KaVo ProXam využívá technologie Narrow Beam Tomography (výpočetní tomografie s úzkým svazkem) k vytváření dvojrozměrných (2D) rentgenových snímků a 3D rentgenové přístroje KaVo ProXam využívají technologie Cone Beam Computed Tomography (výpočetní tomografie s kuželovým svazkem) k vytváření trojrozměrných (3D) rentgenových snímků. Během zpracování dvojrozměrných (2D) snímků jsou používány panoramatické, kefalometrické a projekčně-radiografické techniky. Snímky mohou být použity pro vyšetření dentomaxilofaciální, ušní, nosní, krční, krční páteře a také dalších částí kraniální anatomie. Rentgenový přístroj smí být používán pouze pod dohledem odborného zdravotního pracovníka.

1.2 Prostředí použití

Tento rentgenový přístroj je určen k použití v prostředí profesionální zdravotní péče, například v zubních ordinacích, na klinikách a podobně.

2 Související dokumentace

Rentgenový přístroj je dodáván spolu s následujícími dokumenty:

- Návod k použití
- Montážní návod
- Technická příručka
- Návod k použití kalibračních nástrojů

Tyto návody jsou určeny pro využití společně s dokumentací programu Romexis. Balík Romexis obsahuje následující příručky:

- Návod k použití
- Technická příručka


Původním jazykem návodů k použití je angličtina.


POZNÁMKA


[Tyto návody k použití jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách společnosti KaVo.](#)


3 Symboly na štítcích na produktu


 Splňuje požadavky směrnic 93/42/EHS a RoHS, REACH a OEEZ.


 Zdravotnický přístroj


 Označení seznamu SGS podle amerických a kanadských norem (ANSI/AAMI ES60601-1 a CAN/CSA C22.2 No. 60601-1).


 Datum výroby (norma ISO 7000).


 Typ B (norma IEC 60417).

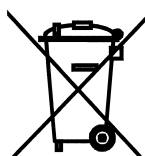
 Oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení podle směrnice 2012/19/EU (OEEZ).


 Podívejte se do elektronického návodu k použití (norma ISO 7000-1641).

 Podívejte se do návodu k použití (norma ISO 7010).

 Nouzové zastavení (norma IEC 60417)

 Varování: Pozor, elektrický proud (norma ISO 7010).
Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, musí být přístroj připojen k napájení s ochranným uzemněním.

 Zařízení citlivé na elektrostatický náboj (norma IEC 60417)

 Pozor, horký povrch (norma ISO 7010).



Obecné upozornění (norma ISO 7010).

4 Bezpečnostní opatření



VAROVÁNÍ

Je nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nebezpečí úrazu nebo poškození rentgenového přístroje.

UPOZORNĚNÍ

PRO POČÍTAČOVÉ UŽIVATELE:

Federální zákon povoluje prodej tohoto přístroje pouze zubnímu lékaři nebo na jeho objednávku.

UPOZORNĚNÍ

Tento rentgenový přístroj může být nebezpečný pro pacienta a obsluhu, pokud nebudou dodrženy bezpečné expoziční hodnoty a správné pracovní postupy.

UPOZORNĚNÍ

Je velmi důležité řádně odstínit prostor, ve kterém je přístroj umístěn a kde se používá, a prostor, odkud ho uživatel ovládá.

Předpisy pro ochranu před zářením se v různých zemích liší, proto je za splnění všech místních bezpečnostních předpisů zodpovědný uživatel.

UPOZORNĚNÍ

Polohovací světla pacienta jsou laserová světla. Nedívejte se přímo do laserového paprsku.

UPOZORNĚNÍ

Snímač neupustěte.

KaVo se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným zacházením, například upuštěním senzoru či nedbalostí, nebo jakýmkoli důvodem jiným, než v důsledku běžného zamýšleného užívání.

V případě jakýchkoli odůvodněných pochybností o správné funkci snímače proveďte nejprve zkušební expozici, než pořídíte expozici pacienta.

UPOZORNĚNÍ

V případě přerušení expozice (například při uvolnění expozičního tlačítka nebo stisknutí tlačítka nouzového zastavení) před posunutím C-ramene vyveďte pacienta z prostoru rentgenového přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Nepřipojujte prvky, které nejsou specifikovány jako součásti systému.

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se elektrického konektoru a pacienta současně.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že rentgenový přístroj vykazuje jakékoli známky úniku oleje, přístroj vypněte a požádejte o pomoc servisního technika.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte rentgenový přístroj v prostředí s vysokou koncentrací kyslíku nebo prostředí obsahujícím hořlavá anestetika.

UPOZORNĚNÍ

Vadný nebo poškozený rentgenový přístroj nikdy nepoužívejte. Požádejte o pomoc servisního technika.

UPOZORNĚNÍ

Rentgenový přístroj neupravujte. Servis přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

UPOZORNĚNÍ

Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně periférií, jako jsou anténní kabely a externí antény), nesmí být používány blíže k žádné části přístroje než ve vzdálenosti 30 cm (12 palců), včetně kabelů specifikovaných výrobcem. Jinak může dojít ke snížení výkonu tohoto přístroje.

POZNÁMKA

Snímkování pomocí kuželového paprsku by nemělo být používáno pro rutinní či screeningové prohlídky. Snímkovací prohlídky musí být u každého jednotlivé pacienta plně ospravedlnitelné a převaha jejich užitku nad rizikem musí být zcela zjevná.

POZNÁMKA

V případech předpokládané nutnosti provádět v rámci pacientova radiologického vyšetření také vyšetření měkkých tkání je třeba použít konvenční CT nebo MR snímkování, namísto CBCT.

POZNÁMKA

Před snímkováním se každé ženy ve fertilním věku zeptejte, zda může být těhotná. Rentgenový přístroj nesmí být používán u těhotných žen.

POZNÁMKA

PRO KANADSKÉ UŽIVATELE:

Každému pacientovi je nutné poskytnout stíněnou zástěru pro ochranu gonád a štít pro štítnou žlázu. Použití štítu štítné žlázy je obzvláště důležité u dětí. Stíněná zástěra a štít štítné žlázy by měly vykazovat stínění srovnatelné s použitím minimálně 0,25 mm olova z obou stran (před a za pacientem).

POZNÁMKA

Pokud byl rentgenový přístroj skladován při teplotách nižších než +10 °C po dobu delší než několik hodin, je nutné ponechat před zapnutím přístroji čas, aby dosáhl pokojové teploty.

POZNÁMKA

V místnosti s rentgenovým přístrojem zajistěte dostatečnou klimatizaci. Doporučujeme trvale udržovat teplotu v místnosti v rozsahu +20 až +25 °C.

POZNÁMKA

Rychlé pořizování jedné expozice za druhou může způsobit přehřátí rentgenové lampy, v takovém případě se na dotykové obrazovce zobrazí blikající čas nezbytný pro ochlazení. Čas chladnutí znamená dobu, po jejímž uplynutí je možné opět snímkovat.

POZNÁMKA

Není-li přístroj připojen ke zdroji UPS (Uninterruptible Power Supply), během bouřek přístroj vypněte a odpojte ho od počítačů.

POZNÁMKA

PRO UŽIVATELE V USA A KANADĚ:

Laserová světla jsou laserové produkty třídy II (21 CFR § 1040.10).

POZNÁMKA

PRO UŽIVATELE Z EVROPY:

Laserová světla jsou laserové produkty třídy 1 (Standard IEC / EN 60825-1: 2007).



POZNÁMKA

Je nutné vzít v úvahu požadavky EMC a přístroj nainstalovat a uvést do provozu podle specifických informací ohledně EMC poskytnutých v příložených dokumentech.

POZNÁMKA

Externí zařízení určené pro spojení se vstupem signálu, výstupem signálu či jiné konektory musí splňovat požadavky příslušné normy IEC (např. IEC 60950 pro IT zařízení a řady IEC 60601 pro zdravotnické elektrické přístroje). Mimo to, veškeré takové kombinace - systémy - musí vyhovovat normě IEC 60601-1, Bezpečnostní požadavky pro zdravotnické elektrické systémy. Zařízení, které nesplňuje požadavky normy IEC 60601, musí být umístěno mimo prostor pacienta (dále než 2 m / 79 stop od rentgenového přístroje). Kterákoli osoba, jenž připojí externí zařízení ke vstupu signálu, výstupu signálu nebo jiným konektorům tímto utvořila systém a tudíž je zodpovídá za shodu tohoto systému s požadavky normy IEC 60601-1. Pokud budete na pochybách, požádejte o pomoc servisního technika nebo místního zástupce.

POZNÁMKA

Pokud si všimnete snížení kvality snímků, kontaktujte servisního technika.

POZNÁMKA

Jestliže se po expozici snímek neobjeví v aplikaci Romexis, můžete ho do aplikace Romexis importovat ručně. Další podrobnosti najdete v *uživatelské příručce aplikace Romexis*.

POZNÁMKA

Nemanipulujte s kapalinami v blízkosti rentgenového přístroje.

POZNÁMKA

Na žádnou část rentgenového přístroje nikdy neumistujte ani nezavěšujte žádné předměty.

POZNÁMKA

Dávejte pozor, abyste se ani vy, ani pacient nezachytli nebo nezahákli o žádnou část rentgenového přístroje. Udržujte bezpečně stranou všechny volné části oděvu, vlasy a šperky.

POZNÁMKA

Máte-li jakékoli důvodné podezření, že C-rameno může pacienta během expozice udeřit (např. když má pacient široká ramena), proveďte nejdříve zkušební expozici bez radiace. Pro vypnutí radiace vyberte Settings > User > 1300 Operational Settings > 1310 Use Mode > 1311 Set Demo Mode (Nastavení > Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1310 Režim použití > 1311 Nastavit demonstrační režim).

Další možností je použít tlačítko 90° na spodní straně obrazovky k provedení testu rotace C-ramene, ještě než začnete pořizovat 3D expozici.

**POZNÁMKA**


Nedotýkejte se ramen přístroje, když se přístroj pohybuje.

POZNÁMKA

Pacient se nesmí zavěsit za madla.

POZNÁMKA

PRO RENTGENOVÉ PŘÍSTROJE S ROTUJÍCÍ RENTGENOVOU HLAVICÍ:

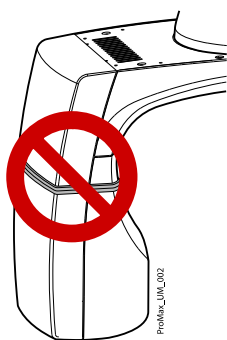

Nedotýkejte se kovových částí uprostřed rentgenové hlavy. Mohou se silně zahřívat.

POZNÁMKA

Přenosná mobilní zařízení a jiná zařízení vysílající vysokofrekvenční elektromagnetickou energii používaná v blízkosti přístroje mohou negativně ovlivnit jeho výkon. Může dojít ke ztrátě diagnostických informací z RTG snímku a zbytečnému ozáření pacienta rentgenovým zářením.

4.1 Hlášení vážných nehod

Vážné nehody, ke kterým došlo v souvislosti se zařízením, musí být nahlášeny výrobci a příslušnému místnímu úřadu.


5 Zapnutí rentgenového systému

POZNÁMKA

V zájmu prodloužení životnosti vašeho rentgenového systému jej vždy vypínejte, kdykoli není aktivně využíván.

5.1 Zapnutí rentgenového přístroje

Vypínač je umístěn na spodní straně víka sloupu.

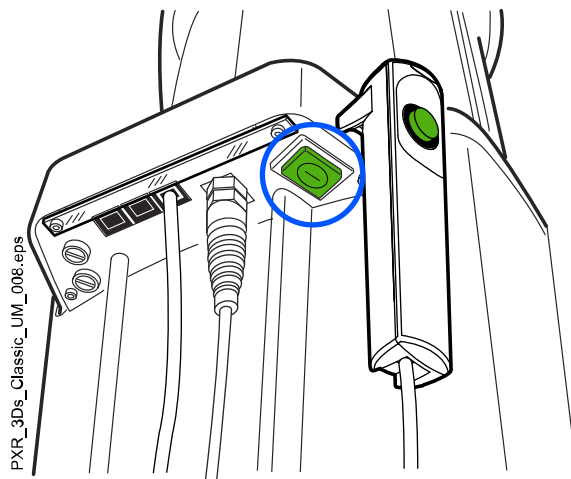


5.2 Zapnutí PC pro 3D rekonstrukci

Tlačítko vypínače je umístěno na horní straně počítače.




6 Hlavní části

6.1 Celkový pohled na rentgenový systém

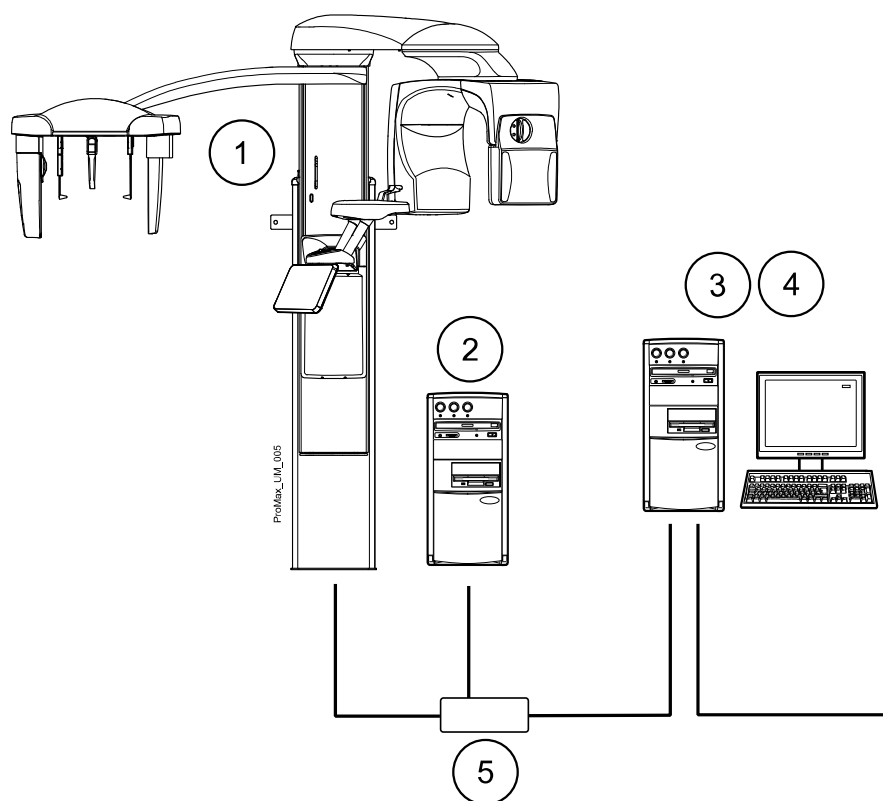


- 1 Rentgenový přístroj
- 2 PC pro 3D rekonstrukci
- 3 Aplikace Romexis
- 4 PC aplikace ProTouch (volitelné, viz část "PC aplikace ProTouch" na str. 20)
- 5 Ethernetový switch

6.2 Celkový pohled na rentgenový přístroj

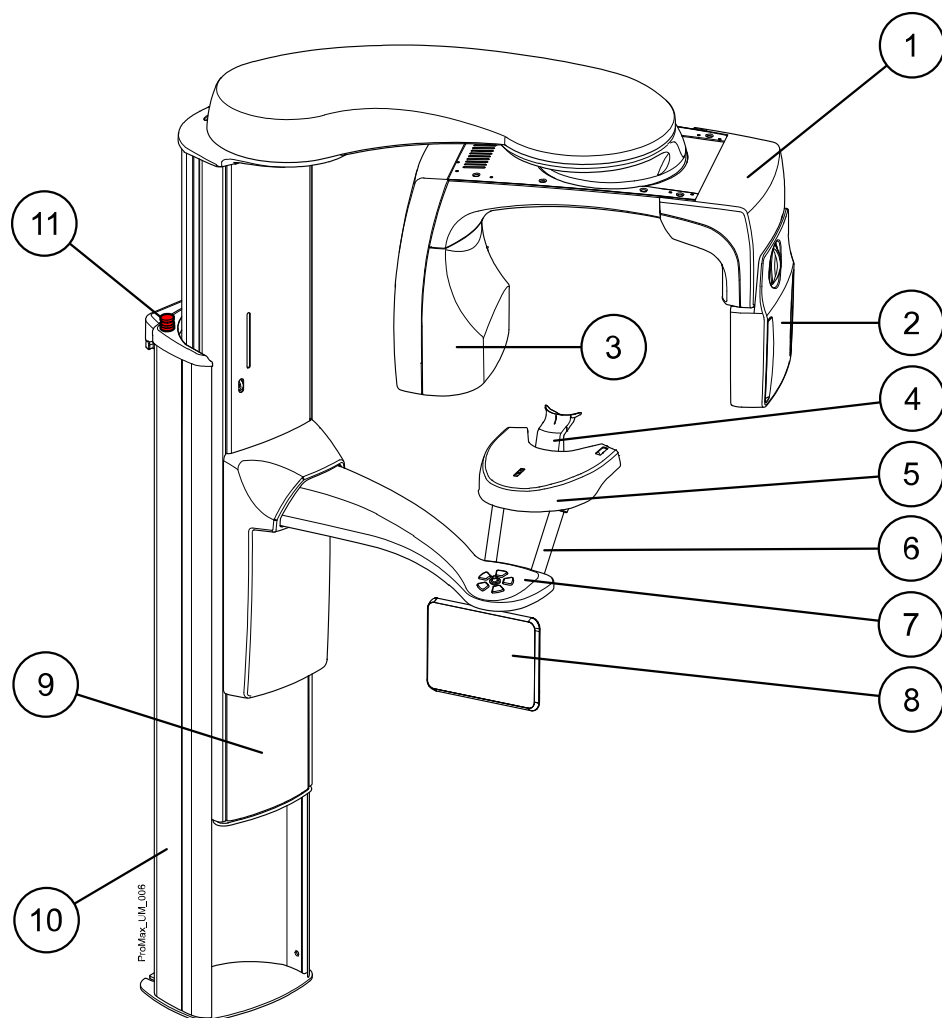



- 1 C-rameno
- 2 Snímač (viz část "Senzor" na str. 13)
- 3 Rentgenová hlavice (viz část "Rentgenka" na str. 13)
- 4 Opěrky pacienta (viz část "Opěrky pacienta" na str. 14)
- 5 Stolek pacienta
- 6 Madla pro pacienta
- 7 Ovládací prvky polohování pacienta (viz část "Ovládací prvky polohování pacienta" na str. 22)
- 8 Dotyková obrazovka (viz část "Dotyková obrazovka" na str. 16)
- 9 Teleskopický sloup
- 10 Pevný stojan
- 11 Tlačítko nouzového zastavení (viz část "Nouzový vypínač" na str. 16)

6.3 Senzor

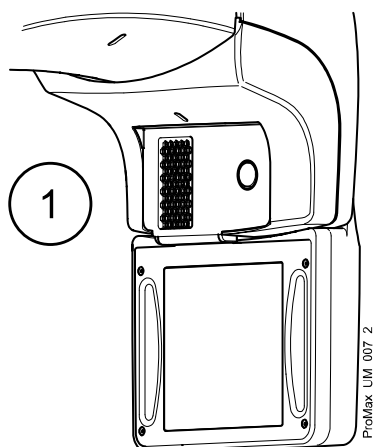

1 3D snímač pro přístroj KaVo ProXam 3DQ


6.4 Rentgenka

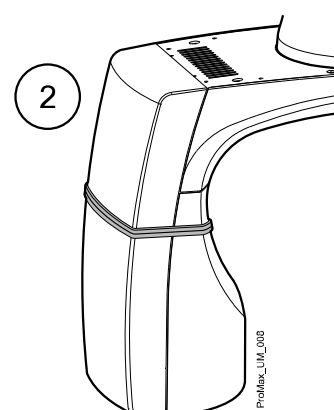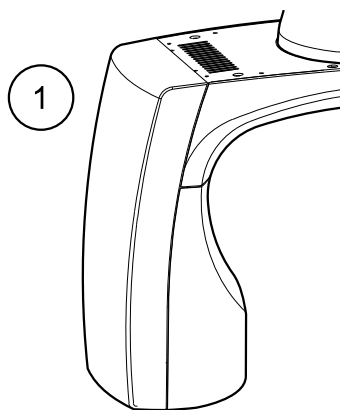

1 Nerotující rentgenová hlavice
2 Rotující rentgenová hlavice

6.5 Opěrky pacienta

6.5.1 Opěrky hlavy (varianta A nebo B)

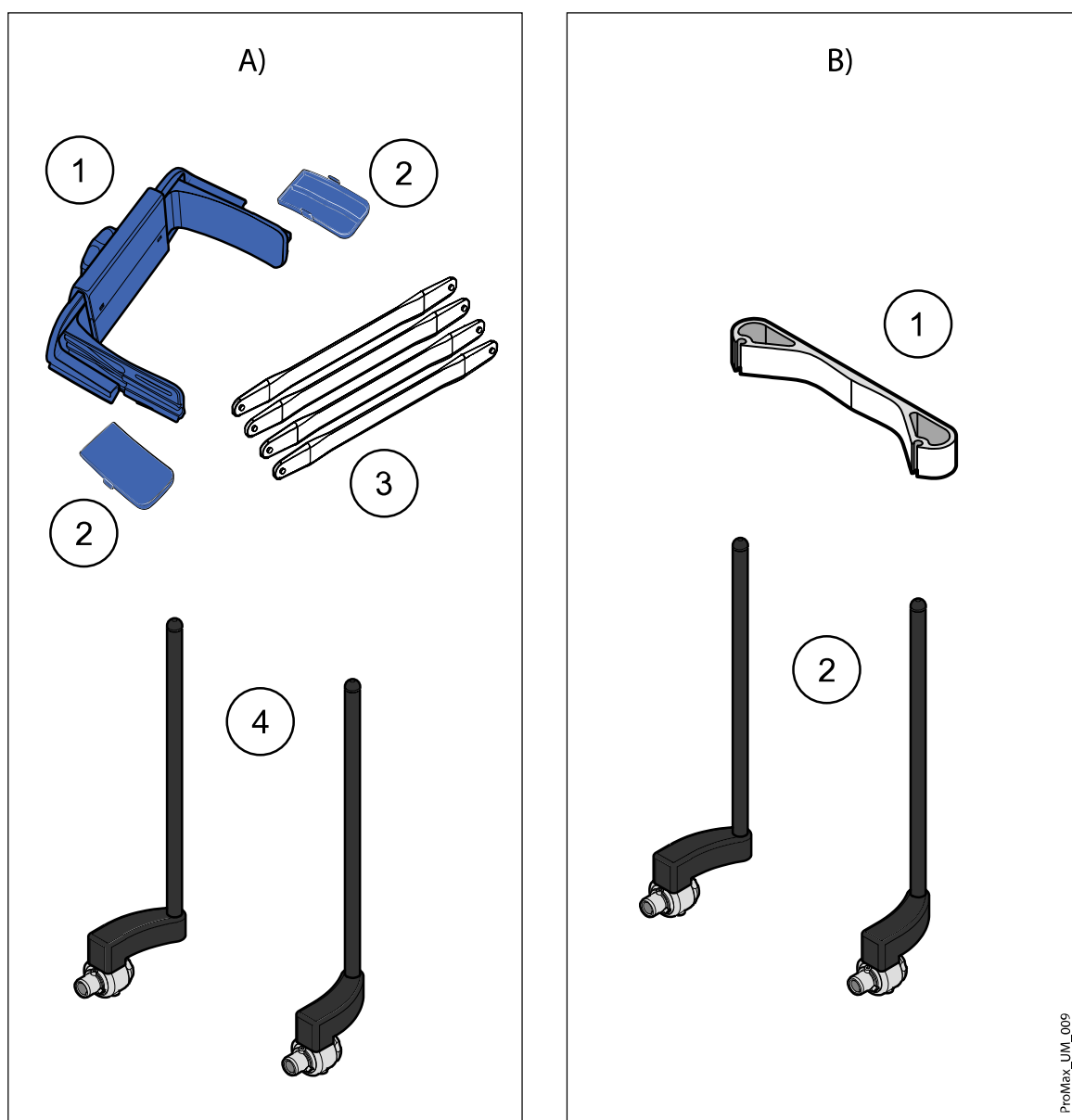

Varianta A



- 1 Nastavitelná opěrka hlavy
- 2 Spánkové podložky pro děti
- 3 Fixační popruhy
- 4 Podpěrné tyče

Varianta B

- 1 Pásová opěrka hlavy 25
- 2 Podpěrné tyče

ProMax_UM_009

6.5.2 Opěrky brady

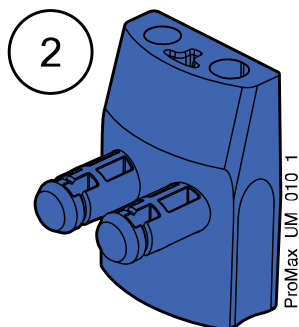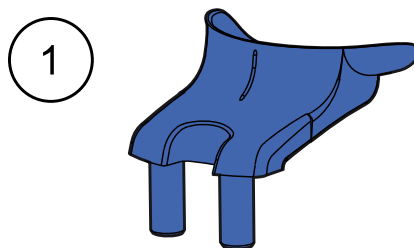


- 1 Misková opěrka brady
- 2 Adaptér

6.6 Expoziční tlačítko

Expoziční tlačítko může být upevněno na stěnu nebo, je-li v dosahu stíněná oblast, zavěšeno na háček vyvedený z víka stacionárního sloupu.

Zatímco se rentgenový systém připravuje na expozici, na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce blikají zelená světla. Jakmile bude rentgenový systém připraven na expozici, tato zelená světla přestanou blikat a začnou svítit soustavně.

Během expozice svítí na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce žlutá výstražná světla varující před radiací. Oznamují, že rentgenový přístroj právě produkuje radiační záření.

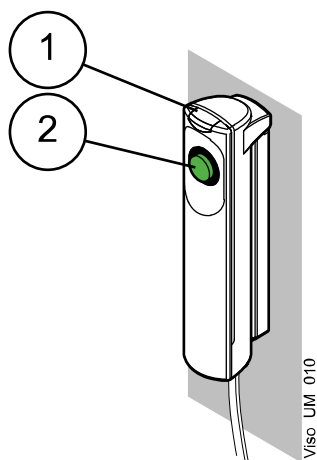

- 1 Expoziční tlačítko
- 2 Spínač expozičního tlačítka

6.7 Nouzový vypínač

Tlačítko nouzového zastavení je umístěno na víku stacionárního sloupu. Stisknutím tlačítka lze zastavit rentgenový přístroj v případě nouze. Po stisknutí tlačítka se zablokuje veškerý pohyb přístroje a přístroj přestane vysílat záření. Brzdná dráha posunu nahoru/dolů nepřekročí 10 mm (0,4 palce).

Na dotykové obrazovce se zobrazí pomocná zpráva. Odvedte pacienta z dosahu rentgenového přístroje. Poté uvolněte tlačítko nouzového zastavení. Rentgenový přístroj se automaticky restartuje.



6.8 Dotyková obrazovka

POZNÁMKA

Rentgenový přístroj je dodáván ve variantách s fyzickým nebo virtuálním ovládacím panelem (případně s oběma). Tento Návod k použití je platný pro veškeré volitelné konfigurace.

POZNÁMKA

Možnosti zobrazené na dotykové obrazovce závisí na konfiguraci přístroje. Rentgenový přístroj může být rozšířen o nové programy a funkce, kontaktujte svého prodejce a vyžádejte si další podrobnosti. Náhledy a hodnoty v tomto Návodu k použití slouží pouze pro ilustraci.



POZNÁMKA

Ilustrace zobrazované na dotykové obrazovce jsou založeny na odhadu anatomie pacienta. Skutečný nezbytný rozměr expoziční oblasti závisí na konkrétní anatomii daného pacienta.

POZNÁMKA

Nikdy nedovolte pacientovi, aby během svého polohování v rentgenovém přístroji manipuloval s dotykovou obrazovkou. Dotykem obrazovky během snímkování dojde k zastavení procesu snímkování.


Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka zobrazuje název a snímkový programy daného rentgenového přístroje. Můžete použít tlačítka ve spodní straně hlavní obrazovky pro změnu vzhledu hlavního zobrazení.



Domovské tlačítko

Pro zobrazení až pěti naposledy použitých programů vyberte domovské tlačítko. Jako první se zobrazí naposledy použitý program. Toto je výchozí zobrazení hlavní obrazovky.

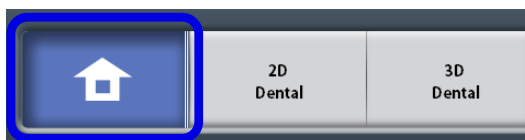


ProMax_UM_014

POZNÁMKA

Pokud si přejete, aby toto zobrazení obsahovalo tlačítka pro zrychlenou volbu, vyberte **Settings > Program > 2200 Program Features > 2240 General > Fast Forward ON (Nastavení > Program > 2200 Funkce programu > 2240 Obecné > Zrychlená volba zapnuta)**. Použití tlačítek zrychlené volby Vás přenesou přímo do obrazovky umožňující pořízení expozice.

Tlačítka programových skupin

Pro zobrazení všech dostupných programů v rámci programové skupiny vyberte tlačítko Program Group (Programová skupina).

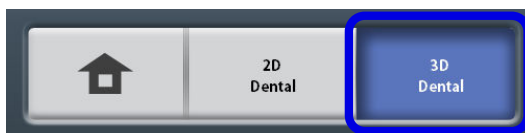

Provedení výběru



Výběr položek na dotykové obrazovce lze provést dotykem daného tlačítka či pole prstem, případně měkkým stylusem. Zvolená možnost se zvýrazní. Pro zrušení označení volby se daného tlačítka či pole dotkněte znovu (případně vyberte jinou volbu, je-li dostupná).

Označení položky je doprovázeno zvukovou zpětnou vazbou. Pokud si přejete upravit hlasitost této zpětné vazby, vyberte **Settings > User > 1300 Operational Settings > 1320 Audio Settings > Touch Volume (Nastavení > Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1320 Nastavení zvuku > Hlasitost doteku)**.

POZNÁMKA

K interakci s dotykovou obrazovkou nepoužívejte ostré předměty.

Tlačítko pro přijetí

Pro potvrzení volby vyberte tlačítko se zeleným symbolem zatržítka.

Tlačítko pro zrušení


Pro zrušení volby a zavření obrazovky vyberte tlačítko s červeným symbolem křížku.

Tlačítko pro pozastavení


Pro pozastavení funkce (namísto jejího zrušení) vyberte tlačítko pro pozastavení.

Přechod na další obrazovku

Pro přechod na další obrazovku vyberte buďto tlačítko pro přechod na další obrazovku, nebo **další** symbol v pořadí na spodní straně obrazovky.

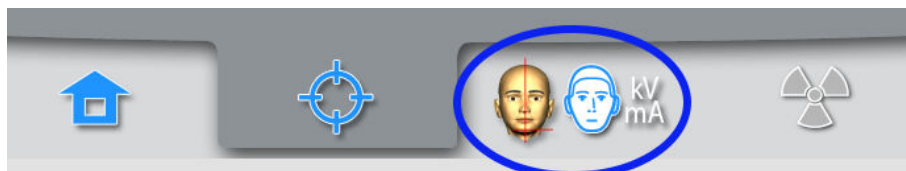**Přechod na předcházející obrazovku**


Pro přechod na předcházející obrazovku vyberte předchozí symbol ve spodní části obrazu.

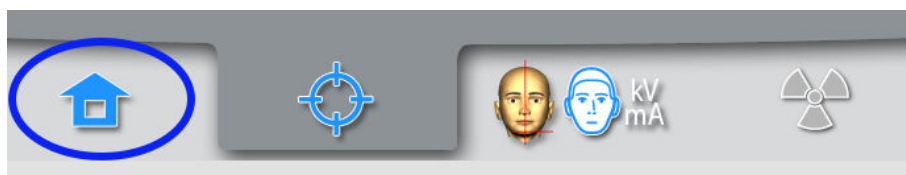**Listování seznamy**

Pro listování seznamem nahoru nebo dolů stačí posunout prst po dotykové obrazovce.


Ověření pacientova jména a identifikačního čísla (ID)

Pacientovo jméno a ID číslo se zobrazují b horním pravém rohu dotykové obrazovky. V aplikaci Romexis je nutné zvolit pacienta expoziční režim.

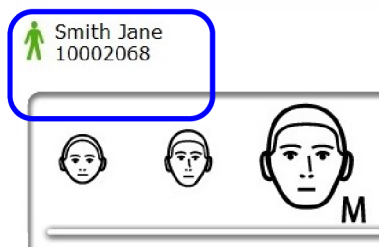

Ověření hodnot DAP a CTDI

Odhadované hodnoty DAP (Součin dávky a plochy) a CTDI (Index dávky výpočetní tomografie) se před pořízením expozice zobrazují na dotykové obrazovce, psané černým písmem. Skutečné hodnoty, psané zeleným písmem, se zobrazují po expozici.

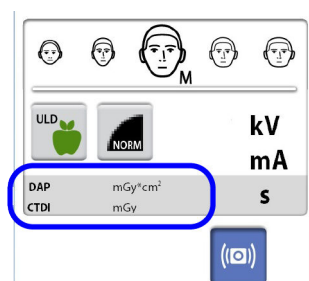

Změna nastavení

Pro změnu nastavení vyberte symbol nastavení na hlavní obrazovce. Tím vstoupíte do nabídky nastavení, odkud je možné upravit nastavení rentgenového přístroje. Více informací naleznete v části "Nastavení" na str. 54.




Pohotovostní režim

Dotyková obrazovka automaticky přechází do pohotovostního režimu, kdykoli není s dotykovou obrazovkou ani expozičním tlačítkem nijak manipulováno po dobu delší třiceti minut. V pohotovostním režimu zelené světlo na vypínač indikuje zapnutý stav rentgenového přístroje, přestože je jeho obrazovka momentálně ztmavená. Jakmile se obrazovky znovu dotknete, okamžitě se opět rozsvítí.

Výběr demonstračního režimu

Pokud si přejete procvičovat či demonstrovat funkce rentgenového přístroje bez radiace a spojení s PC, můžete zapnout demonstrační režim. Pro tuto funkci je třeba vybrat **Settings > User > 1300 Operational settings > 1310 Use Mode > 1311 Set Demo Mode (Nastavení > Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1310 Režim použití > 1311 Nastavit demonstrační režim)**. V levém dolním rohu dotykové obrazovky se zobrazí výběr možností.

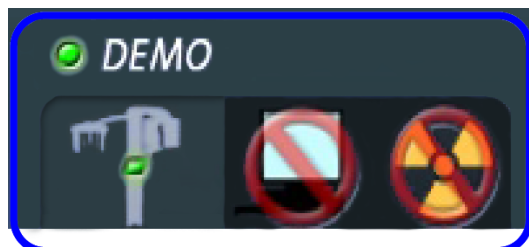

6.9 PC aplikace ProTouch

Pokud je na vašem počítači nainstalována PC aplikace ProTouch, můžete používat virtuální ovládací panel na obrazovce vašeho počítače.


Aplikace je identická s rozhraním dotykové obrazovky, která může být dle zvolené konfigurace zabudována do vašeho rentgenového přístroje. Máte-li k dispozici jak fyzický, tak i virtuální ovládací panel, můžete používat kterýkoliv z nich. Případně můžete panely synchronizovat a používat oba současně.



POZNÁMKA

Pokud si přejete používat aplikaci pro přechod do připraveného stavu, budete potřebovat platnou licenci. Kontaktujte svého prodejce a požádejte o radu.

Pokud si přejete použít virtuální ovládací panel, nejprve ve svém počítači spusťte aplikaci ProTouch dvojitým kliknutím myši na jeho ikonu. Poté klikněte myší na funkci, kterou si přejete použít.

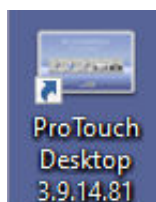

POZNÁMKA

Pokud se pokusíte použít nabídku nastavení před spuštěním aplikace, zobrazí se vám pomocná zpráva. Aplikace se po přijetí nápovědné zprávy automaticky ukončí. Můžete ji znovu spustit opětovným dvojitým kliknutím na její ikonu.

Malá ikona v levém dolním rohu obrazovky oznamuje stav připojení aplikace k rentgenovému přístroji.

- Zelená ikona značí bezproblémové připojení:



- Červená ikona značí nefunkční připojení:



Pokud se zobrazuje červená ikona, restartujte rentgenový přístroj.

Okno ovládacího panelu můžete přesunout přetažením myší.



Pro ukončení aplikace klikněte na malý červený symbol křížku v pravém horním rohu okna.




6.10 Ovládací prvky polohování pacienta

POZNÁMKA

Za žádných okolností neumožňujte pacientům, aby po umístění do rentgenového přístroje jakkoli manipulovali s jeho ovládacími prvky pro polohování.

POZNÁMKA


Použití kteréhokoli z polohovacích prvků (tlačítka či joysticku) vyvolá rozsvícení světel pro polohování pacienta. Světla po dvou minutách automaticky zhasnou. Pro jejich okamžité zhasnutí stiskněte polohovací joystick.

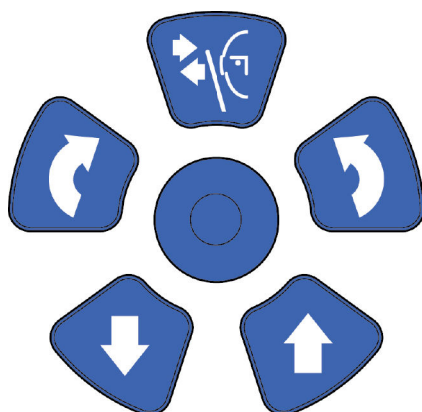

6.10.1 Posun rentgenového přístroje nahoru/dolů

Pomocí tlačítek pro posun rentgenového přístroje nahoru a dolů lze nastavit rentgenový přístroj do vhodné výšky odpovídající výšce pacienta.

Rentgenový přístroj se pohybuje nejdřív pomalu, pak rychleji.

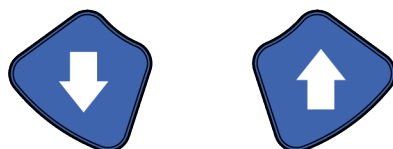

POZNÁMKA

Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zablokování stisknutého tlačítka během posouvání, posun nahoru/dolů lze zastavit stisknutím kteréhokoli jiného ovládacího tlačítka nebo polohovacího joysticku. Jedná se o bezpečnostní opatření, které zaručuje možnost nouzového zastavení posunu nahoru/dolů.

POZNÁMKA


Během posouvání rentgenového přístroje nahoru dávejte pozor, aby nenarazil do stropu. Maximální povolenou výšku lze nastavit tak, aby vyhovovala ordinacím s nízkým stropem. Požádejte o pomoc servisního technika.

POZNÁMKA

Ujistěte se, že když tisknete tlačítko pro pohyb směrem dolů, není pod přístrojem žádná překážka. Kdyby hrozilo riziko, že bude něco zachyceno, tlačítko okamžitě uvolněte a zastavte pohyb. Před dalším stisknutím tlačítka odstraňte veškeré překážky.

POZNÁMKA


Dojde-li ke stlačení nouzové dorazové desky na spodní straně, pohyb sloupu se automaticky zastaví. Se sloupem nehýbejte, dokud veškeré případné překážky neodstraníte.

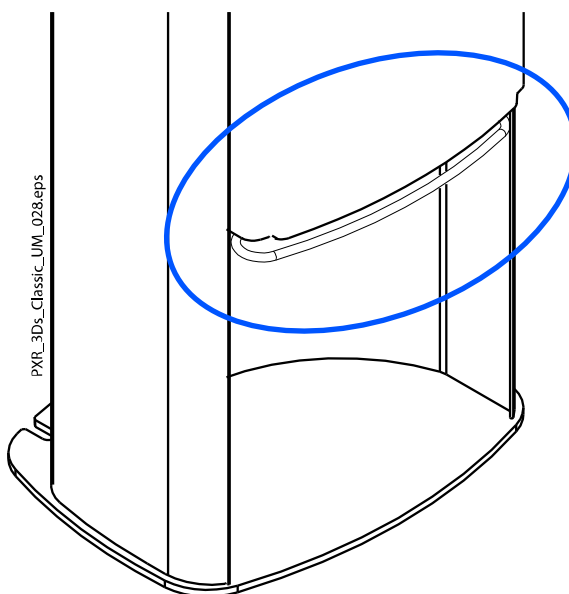

POZNÁMKA

Pokud polohovaný pacient sedí (například ve vozíčkovém křesle), vždy nejprve snižte polohu rentgenového přístroje, než začnete polohovat pacienta v prostoru přístroje.


6.10.2 Polohovací joystick

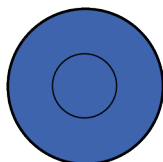

6.10.3 Posun snímaného objemu nahoru/dolů

Tlačítka pro posun snímaného objemu nahoru a dolů slouží k vertikální úpravě polohy snímaného objemu během 3D snímkování. Toto tlačítko nepoužívejte do doby, než bude dokončeno polohování pacienta v rentgenovém přístroji.

Pohyb rentgenového přístroje během tisknutí tlačítka pro posun nahoru/dolů je přiměřeně pomalé. Výška opěrného stolku pacienta se tímto nemění, tj. pacient zůstane ve stejné poloze i po přesunu nahoru nebo dolů.

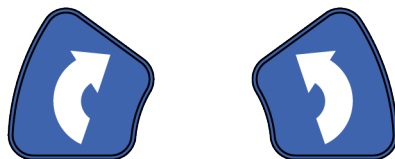

6.10.4 Otevření/uzavření spánkových opěrek

Pro otevření spánkových opěrek během 2D snímkování stiskněte tlačítko pro ovládání spánkových opěrek. Opětovným stiskem tohoto tlačítka spánkové opěrky znovu uzavřete.



7 Programy přístroje KaVo ProXam 3DQ

7.1 3D Dentála

POZNÁMKA

Hodnoty v závorkách představují objemy dětské velikosti.

Program	KaVo ProXam 3DQ
Zub	Ø40 x V50 mm (Ø34 x V42 mm) Ø40 x V80 mm (Ø34 x V68 mm)
Zuby	Ø80 x V50 mm (Ø68 x V42 mm) Ø80 x V80 mm (Ø68 x V68 mm) Ø100 x V60 mm (Ø85 x V50 mm) Ø100 x V100 mm (Ø85 x V85 mm)
Čelist	Ø160 x V60 mm (Ø160 x V60 mm) Ø160 x V100 mm (Ø160 x V100 mm) Ø190 x V60 mm (Ø190 x V60 mm) Ø190 x V100 mm (Ø190 x V100 mm)
Obličej	Ø190 x V90 mm (Ø190 x V90 mm) Ø190 x V150* mm (Ø190 x V150* mm)

* = Dva vertikální snímané objemy

7.2 3D Ucho Nos Krk

POZNÁMKA

Hodnoty v závorkách představují objemy dětské velikosti.

Program	KaVo ProXam 3DQ
Nos	Ø80 x V80 mm (Ø68 x V68 mm)
Dutiny	Ø100 x V80 mm (Ø100 x V80 mm) Ø100 x V100 mm (Ø100 x V100 mm) Ø100 x V140 mm (Ø100 x V140 mm) Ø190 x V80 mm (Ø190 x V80 mm) Ø190 x V100 mm (Ø190 x V100 mm)
Dýchací cesty	Ø80 x V80 mm (Ø68 x V68 mm)
Střední ucho	Ø40 x V50 mm (Ø34 x V42 mm) Ø80 x V80 mm (Ø68 x V68 mm)
Spánková kost	Ø80 x V80 mm (Ø68 x V68 mm)
Obratle	Ø80 x V80 mm (Ø68 x V68 mm)

8 3D expozice pacienta

8.1 Příprava rentgenového systému

8.1.1 Připojení a odpojení snímače

UPOZORNĚNÍ

Snímač neupustíte. KaVo se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným zacházením, např. upuštěním senzoru či nedbalostí, nebo jakýmkoli jiným důvodem, než je důsledek běžného zamýšleného užívání. V případě jakýchkoli odůvodněných pochybností o správné funkci snímače proveďte nejprve zkušební expozici, než pořídíte expozici pacienta.


POZNÁMKA

Dostupné snímače jsou uvedeny v části "Senzor" na str. 13.

8.1.1.1 Upevnění snímače k C-rameni


Kroky

1. Přitlačte snímač ke konektoru C-ramene.

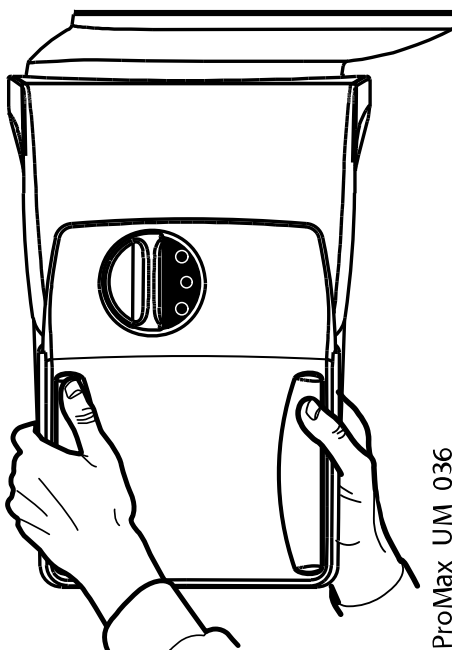


ProMax_UM_036

2. Otočte uzamykací kolečko přes upevňovací mechanismus.

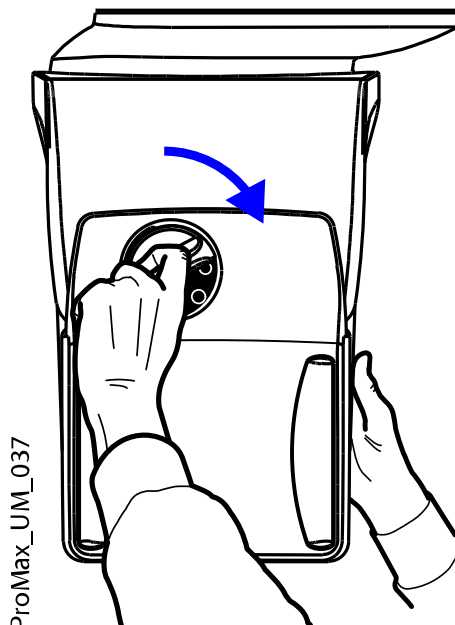

Tím polohu snímače zajistíte.

3. Stiskněte tlačítko elektrického konektoru C-ramene na protější straně.

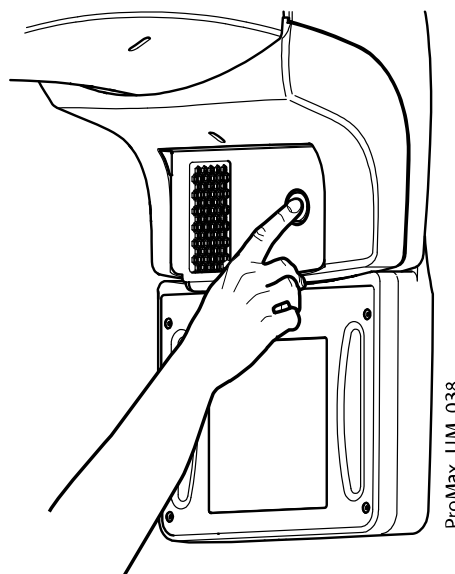

Tím vytvoříte elektrické spojení mezi snímačem a C-ramenem.

8.1.1.2 Odepnutí snímače z C-ramene


O tomto úkolu

POZNÁMKA

Neodepínejte snímač v průběhu procesu snímkování.


Kroky

1. Zatlačte dovnitř elektrický konektor C-ramene.

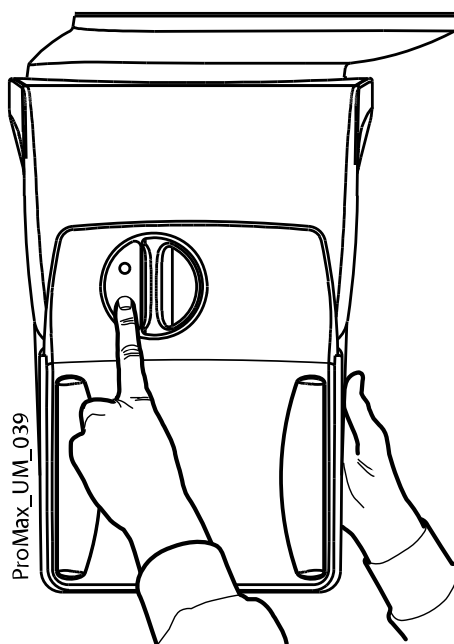


Tím přerušíte elektrické spojení mezi snímačem a C-ramenem.

2. Otočte uzamykacím kolečkem o 180 stupňů.

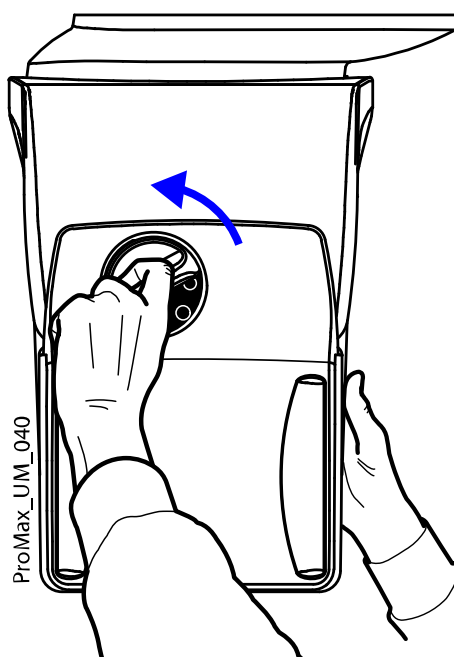

Tím uvolníte zamykací mechanismus.

3. Opatrně snímač vysuňte ven.

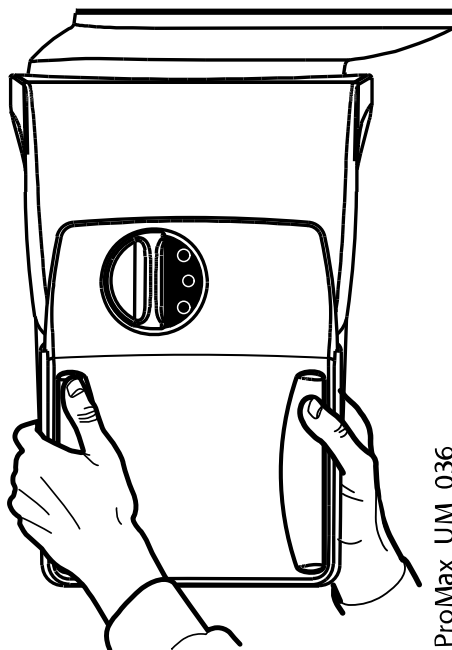

Co dál

POZNÁMKA

Z bezpečnostních důvodů je před opětovným upevněním snímače nutno vyčkat po dobu alespoň deseti vteřin. Modrý světelný indikátor pod uzamykacím kolečkem musí před opětovným upevněním zhasnout.

8.1.2 Upevnění opěrek pacienta


POZNÁMKA

Dostupné opěrky hlavy jsou uvedeny v části "Opěrky hlavy (varianta A nebo B)" na str. 14.

8.1.2.1 Připevnění podpěrných tyčí


Kroky

1. Vložte podpěrné tyče do otvorů podpěrného stolku pacienta.
2. Zafixujte polohu podpěrných tyčí utažením ručních šroubů.

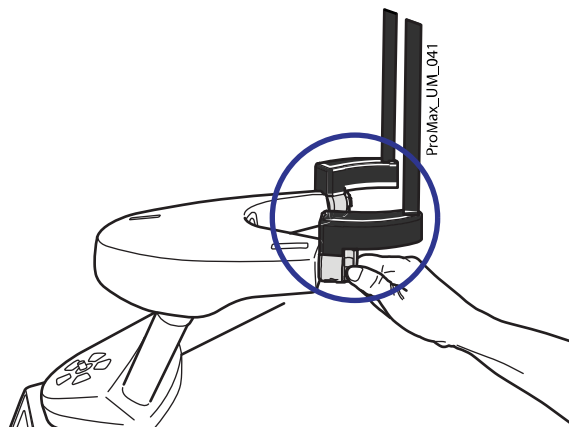

POZNÁMKA

Ujistěte se, že podpěrné tyče vkládáte ve správné orientaci.

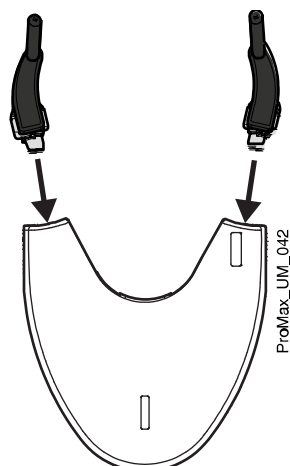


8.1.2.2 Opěrka hlavy A: Připevnění nastavitelné opěrky hlavy

O tomto úkolu


Používáte-li nastavitelnou opěrku hlavy, následujte kroky popsané níže.

Kroky

1. Nasuňte nastavitelnou opěrku hlavy na podpěrné tyče.

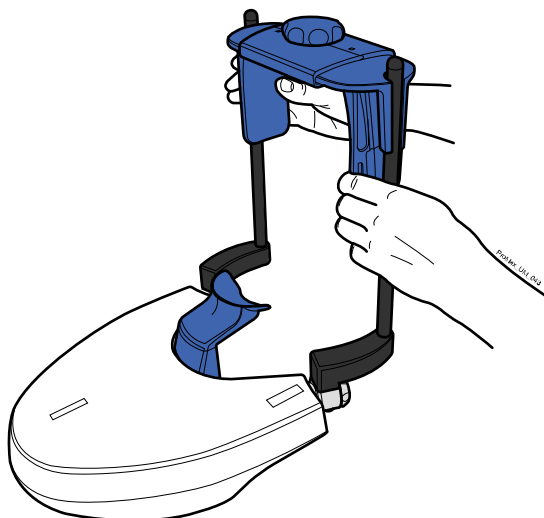

2. Otáčením nastavovacího ručního šroubu přizpůsobte opěrku hlavy rozměrům pacientovy hlavy.

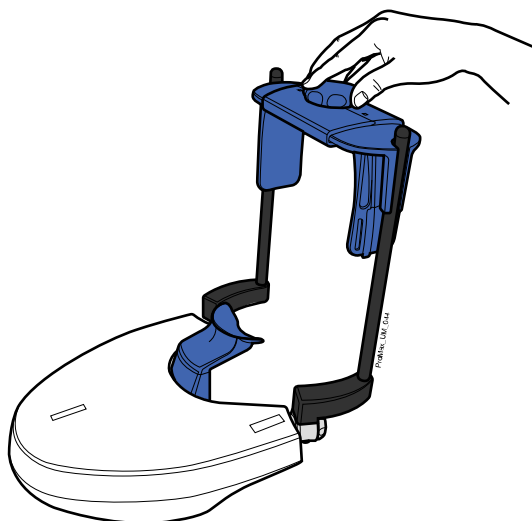


Pokud pořizujete expozici dětského pacienta nebo pacienta s menší hlavou, můžete použít spánkové opěrky.

Nasuňte spánkové opěrky na nastavitelnou opěrku hlavy, viz obrázek. Ujistěte se, že spánkové opěrky zasouváte na doraz.

POZNÁMKA

Spánkové opěrky je nutné umístit na obě strany (nikoli pouze na jednu z nich).

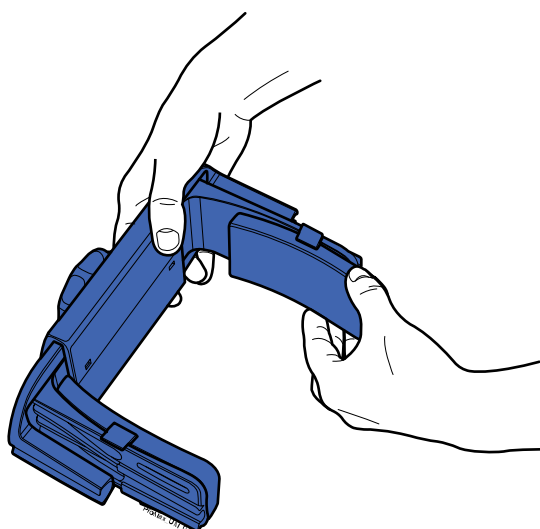


V případě potřeby dodatečné opory hlavy lze použít fixační popruhy. Připevněte jeden popruh k přední části čela a dva k zadní části hlavy, viz obrázek.

POZNÁMKA

S popruhy zacházejte opatrně. Dávejte pozor, aby popruhy nezasáhly pacientovy oči nebo obličej.

POZNÁMKA

Popruhy nepřepínajte. Při roztažení na více než 50 mm (2 palce) popruhy ztrácejí svoji elasticitu. Popruhy s volnou délkou (tj. nejsou-li napnuty) více než 255 mm (10 palců) neposkytují dostatečně pevnou oporu pacientovy hlavy.

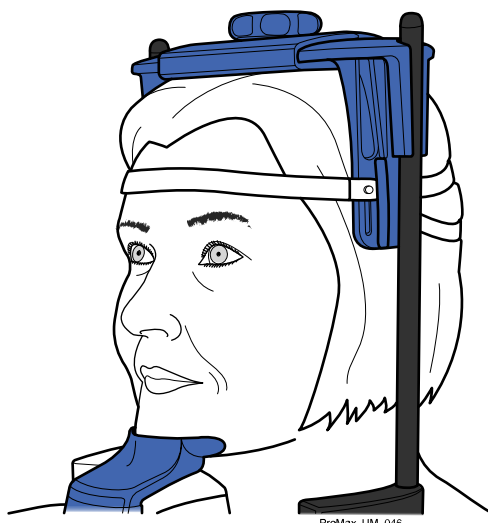


8.1.2.3 Opěrka hlavy B: Připevnění pásové opěrky hlavy

O tomto úkolu

Používáte-li pásovou opěrku hlavy, následujte kroky popsané níže.


Kroky

1. Připevněte pásovou opěrku hlavy k podpěrným tyčím, viz obrázek. Stranu s velkými otvory nastavte směrem k pacientovu čelu.

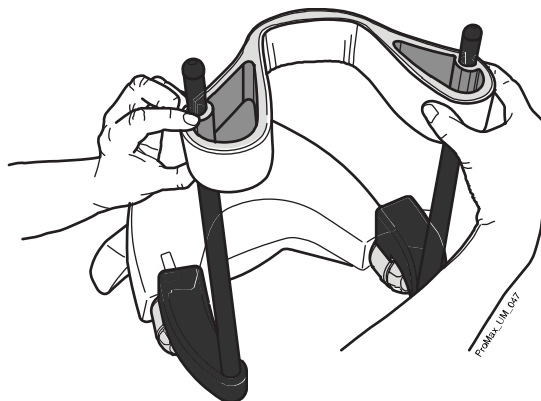

8.1.2.4 Upevnění miskové opěrky brady


Použijte tyto opěrky pro pacienta.

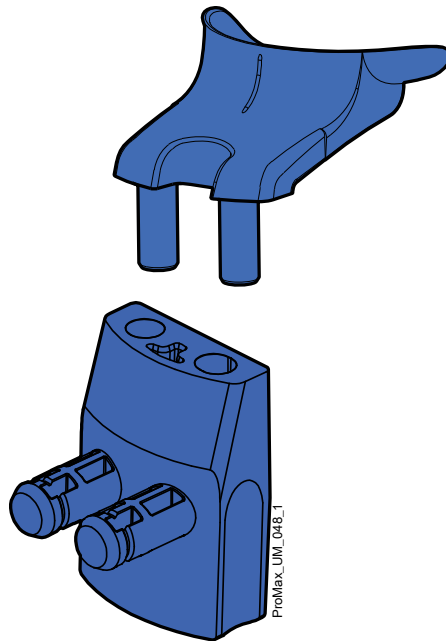

POZNÁMKA

PRO ORTODONTISTY:


Použijte tyto opěrky pro pacienta, přejete-li si získat lepší výhled na jazyk a krční kosti.

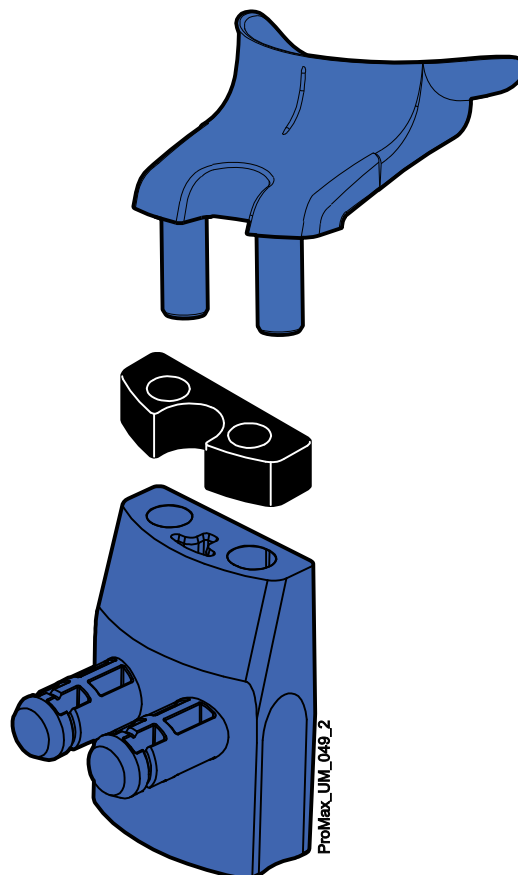


8.1.3 Příprava programu Romexis

Kroky

1. Vyberte pacienta.

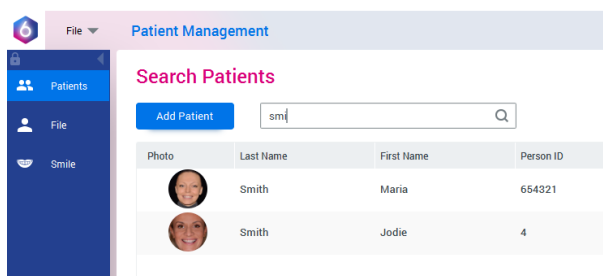

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na pacienta a vyberte „Capture“ (Zachycení) a poté „3D Capture“ (3D zachycení).

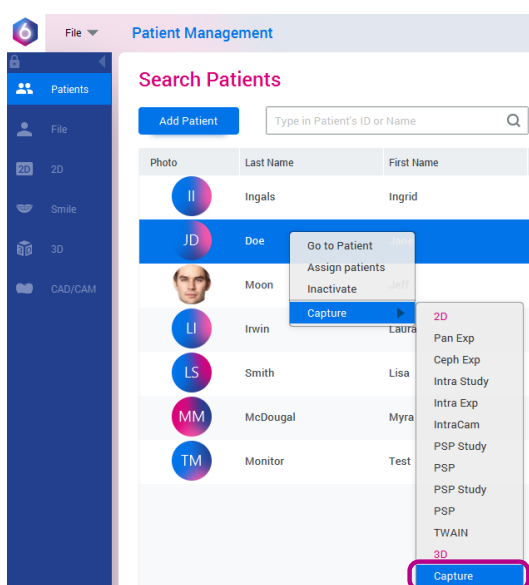

Podrobné informace ohledně funkcí programu Romexis naleznete v *uživatelské příručce programu Romexis*.

8.2 Příprava pacienta

Požádejte pacienta, aby sundal brýle, naslouchací přístroje, umělé chrup, sponky ve vlasech a šperky, jako jsou náušnice, řetízky a piercing, protože mohou způsobit stíny a odrazy ve snímcích. Dále je potřeba, aby si pacient odložil veškeré případné volně visící, nezajištěné části oděvu (např. šátek, kravatu), které by mohly být vtaženy do strukturálních prvků ramena rentgenového přístroje.

POZNÁMKA

Objekty s vysokým kontrastem, například zlatý zub či amalgám, mohou způsobovat vznik artefaktů ve výsledném snímku.

V případě potřeby umístěte na záda pacienta ochrannou olověnou zástěru.


8.3 Výběr nastavení expozice

Obecné informace o provádění a rušení výběru na dotykové obrazovce naleznete v části "Dotyková obrazovka" na str. 16.

8.3.1 Výběr programu

Kroky

1. Vyberte 3D program, který si přejete používat.

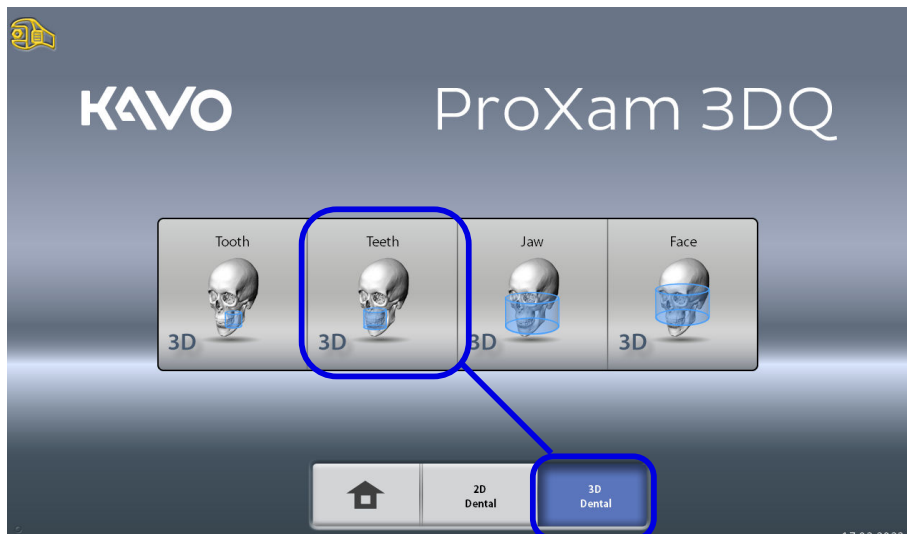


Více informací ohledně dostupných programů naleznete v části "Programy přístroje KaVo ProXam 3DQ" na str. 25.

8.3.2 Výběr velikosti pacienta

Kroky

1. Toto tlačítko slouží k výběru velikosti pacienta.
 - XS = dítě
 - S = malý dospělý
 - M = střední dospělý
 - L = velký dospělý
 - XL = nadrozměrný dospělý

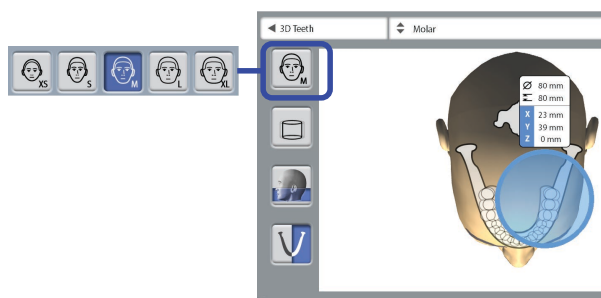

POZNÁMKA

Výběr možnosti pro dětského pacienta (XS) automaticky snižuje objem snímku a radiční dávku, které bude pacient vystaven.

POZNÁMKA

Expoziční hodnoty se automaticky mění podle vybrané velikosti pacienta, rozlišení snímku a nastavení funkce ULD (ultra nízká dávka).

POZNÁMKA


Velikost pacienta lze vybrat také na následující obrazovce.

8.3.3 Výběr průměru a výšky snímaného objemu**Kroky**

1. Pro nastavení průměru a výšky snímaného objemu vyberte jedno z těchto tlačítek.

POZNÁMKA

V závislosti na zvoleném programu může být dostupná pouze jedna z možností.

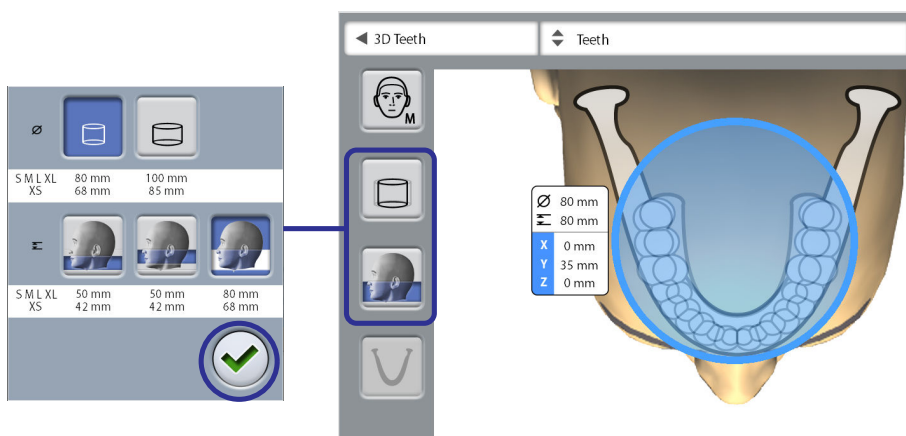


2. Stiskněte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka pro potvrzení vašeho výběru.

POZNÁMKA

Dostupné možnosti závisí na zvoleném programu. Více informací ohledně programů přístroje KaVo ProXam 3DQ naleznete v části "Programy přístroje KaVo ProXam 3DQ" na str. 25.

8.3.4 Výběr polohy objemu**Kroky**


1. Dotkněte se oblasti, pro kterou si přejete pořídit expozici.
Případně vyberte polohu objemu z rozbalovací nabídky nahoře.

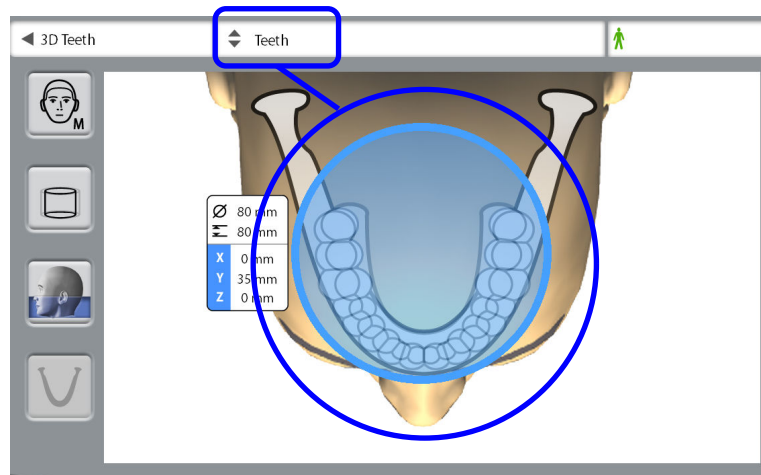**POZNÁMKA**

Dostupné možnosti závisí na zvoleném programu.

8.3.5 Výběr strany čelisti**Kroky**

1. Toto tlačítko slouží pro výběr strany čelisti (pravá / levá / obě strany), pro kterou si přejete pořídit expozici.

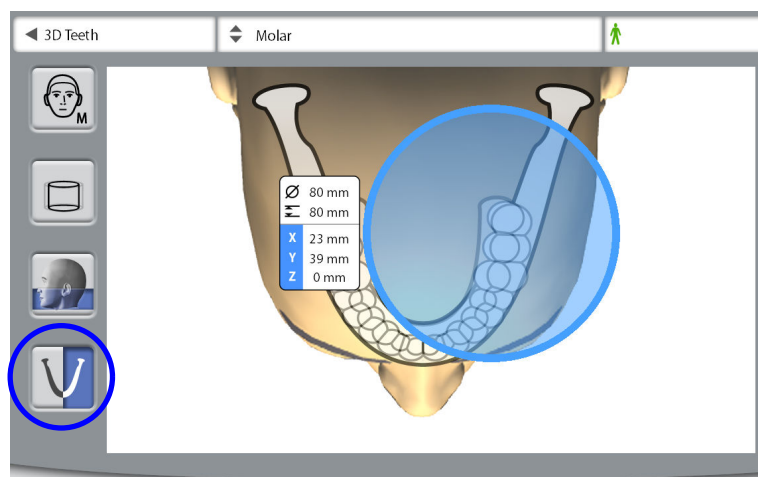**POZNÁMKA**

Dostupné možnosti závisí na zvoleném programu a rozlišení snímku.

8.4 Polohování pacienta

8.4.1 Výběr pacientovy vstupní polohy

Kroky

1. Pro výběr polohy vstupu pacienta použijte tato tlačítka po pravé straně obrazovky.
 - Při výběru tohoto tlačítka se C-rameno posune dozadu, ven z oblasti pro polohování pacienta. Tato poloha s plným výhledem Vám umožní dohlížet na polohu pacienta a dle potřeby ji korigovat z libovolného směru.



- Při výběru tohoto tlačítka C-rameno obklopí opěrný stolec pacienta. Jedná se o tradiční, uzavřenou vstupní polohu pacienta.



POZNÁMKA

Je-li to nezbytné, poloha s plným výhledem (horní tlačítko) může být zakázána (Settings > User > 1300 Operational Settings > 1330 Patient Positioning > Side Entry OFF). To může být nezbytné v případě, kdy nedostatek prostoru znemožňuje pohyb C-ramene směrem vzad.

8.4.2 Polohování hlavy pacienta

Kroky


1. Naveďte pacienta k rentgenovému přístroji.
Během expozice může pacient sedět, nebo stát.

POZNÁMKA

Doporučujeme snímkovat pacienty, kteří nejsou zdraví, vsedě.

- Nastavte rentgenový přístroj do výšky odpovídající výšce pacienta.

To lze provést podržením jednoho z tlačítek pro nastavení výšky do té doby, dokud nebude přibližně v rovině s pacientovou dolní čelistí.

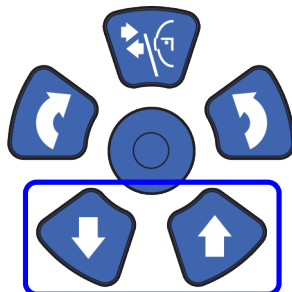

- Požádejte pacienta, aby uchoпил madla pro pacienta.
- Ověřte, že je pacientova hlava pevně podepřena opěrkou hlavy.
 - Nastavení opěrky hlavy lze přizpůsobit otočením nastavovacího ručního šroubu na horní straně.
 - V případě potřeby dodatečné opory hlavy lze použít fixační popruhy. Více podrobností viz část "Upevnění opěrek pacienta" na str. 29.

8.5 Výběr expozičních hodnot


Pro přechod na další obrazovku vyberte:

- Tento symbol



NEBO


- Tlačítko pro pokračování

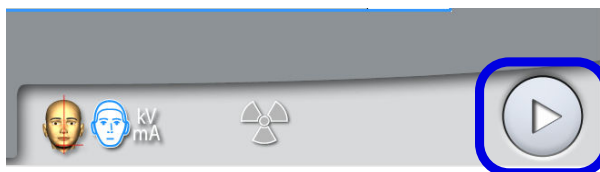

8.5.1 Výběr rozlišení snímku

Kroky

- Toto tlačítko slouží k výběru rozlišení snímku. Velikost voxelů je zobrazena pod tlačítkem rozlišení.

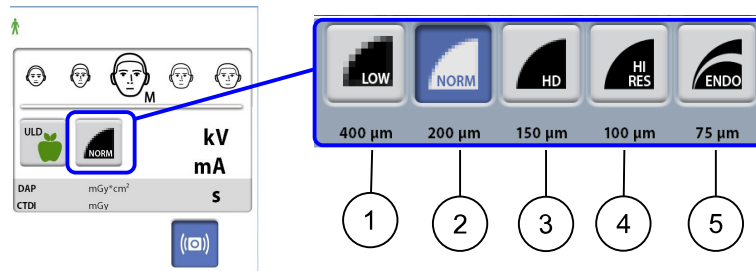

- 1 Low dose (Nízká dávka): Nižší expoziční hodnoty a snížená úroveň radiačního ozáření pacienta
- 2 Normal resolution (Normální rozlišení): Vhodné pro většinu cílů
- 3 High definition (Vysoká citlivost): Lepší kvalita obrazu u drobných cílů, např. ušních kůstek
- 4 High resolution (Vysoké rozlišení): Ostré snímky
- 5 Endodontic (Endodontický snímek): Velmi ostré snímky pro účely endodontického vyšetření nebo jiných malých cílů, například ušních kůstek.

POZNÁMKA

Dostupné možnosti závisí na zvoleném programu a konkrétním modelu rentgenového přístroje.

POZNÁMKA


Expoziční hodnoty se automaticky změní podle vybrané velikosti pacienta, rozlišení snímku a nastavení funkce ULD (ultra nízká dávka).

8.5.2 Výběr ultra nízké dávky (ULD)

Kroky

1. Výběrem ULD tlačítka snížíte úroveň vystavení pacienta radiaci na velmi nízkou hodnotu.

Tuto funkci lze použít ke snížení dávky ozáření pacienta, například během ortodontické terapie, plánování implantátu nebo následného sledování.

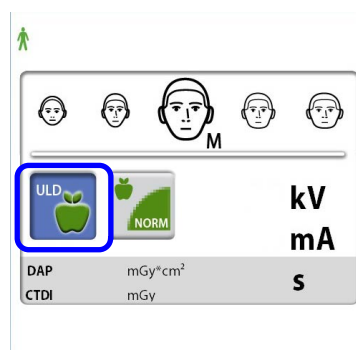

POZNÁMKA

Expoziční hodnoty se automaticky změní podle vybrané velikosti pacienta, rozlišení snímku a nastavení funkce ULD (ultra nízká dávka).

8.5.3 Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici

POZNÁMKA

Vždy se snažte minimalizovat dávku záření, které bude pacient vystaven.

Expoziční hodnoty jsou přednastaveny z výroby pro jednotlivé velikosti pacientů, rozlišení snímků a nastavení funkce ULD (ultra nízká dávka). Přednastavené hodnoty jsou průměrné a jsou pouze orientační.

Přednastavené hodnoty expozice jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tovární nastavení pro rozlišení Low Dose (Nízká dávka) v programech Nose (Nos) a Sinus (Dutiny)

Velikost pacienta	Hodnota kV	Hodnota mA	mA s funkcí ULD
Dítě (XS)	90	2,8	1,4
Malý dospělý (S)	90	3,6	1,8
Střední dospělý (M)	90	5,0	2,2
Velký dospělý (L)	90	5,6	2,8
Nadrozměrný dospělý (XL)	90	7,1	3,6

Tovární nastavení pro rozlišení Low Dose (Nízká dávka) v ostatních programech

Velikost pacienta	Hodnota kV	Hodnota mA	mA s funkcí ULD
Dítě (XS)	90	4	2
Malý dospělý (S)	90	5	2,5
Střední dospělý (M)	90	6,3	3,2
Velký dospělý (L)	90	8	4
Nadrozměrný dospělý (XL)	90	10	5

Tovární nastavení pro rozlišení Normal (Normální) v programech Nose (Nos) a Sinus (Dutiny)

Velikost pacienta	Hodnota kV	Hodnota mA	mA s funkcí ULD
Dítě (XS)	90	3,2	2,2
Malý dospělý (S)	90	4	2,8
Střední dospělý (M)	90	5	3,6
Velký dospělý (L)	90	6,3	4,5
Nadrozměrný dospělý (XL)	90	8	5,6

Tovární nastavení pro rozlišení Normal (Normální) v ostatních programech

Velikost pacienta	Hodnota kV	Hodnota mA	mA s funkcí ULD
Dítě (XS)	90	5	3,6
Malý dospělý (S)	90	6,3	4,5
Střední dospělý (M)	90	8	5,6
Velký dospělý (L)	90	10	7,1
Nadrozměrný dospělý (XL)	90	11	9

Tovární nastavení pro rozlišení High Definition (Vysoká citlivost)


Velikost pacienta	Hodnota kV	Hodnota mA	mA s funkcí ULD
Dítě (XS)	90	5	4,5
Malý dospělý (S)	90	6,3	5,6
Střední dospělý (M)	90	8	7,1
Velký dospělý (L)	90	10	9
Nadrozměrný dospělý (XL)	90	11	11

Tovární nastavení pro rozlišení Hi Res (Vysoké rozlišení) a Endo (Endodontické)

Velikost pacienta	Hodnota kV	Hodnota mA	mA s funkcí ULD
Dítě (XS)	90	6,3	5,6
Malý dospělý (S)	90	8	7,1
Střední dospělý (M)	90	10	9
Velký dospělý (L)	90	11	10
Nadrozměrný dospělý (XL)	90	11	11

Potřebujete-li upravit přednastavení expozičních hodnoty pro tuto expozici:

1. Vyberte pole kV/mA.
2. Použijte tlačítka plus a mínus pro nastavení požadovaných expozičních hodnot. Pro lepší kontrast snímku snižte hodnotu kV. Pro omezení radiační dávky snižte hodnotu mA.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

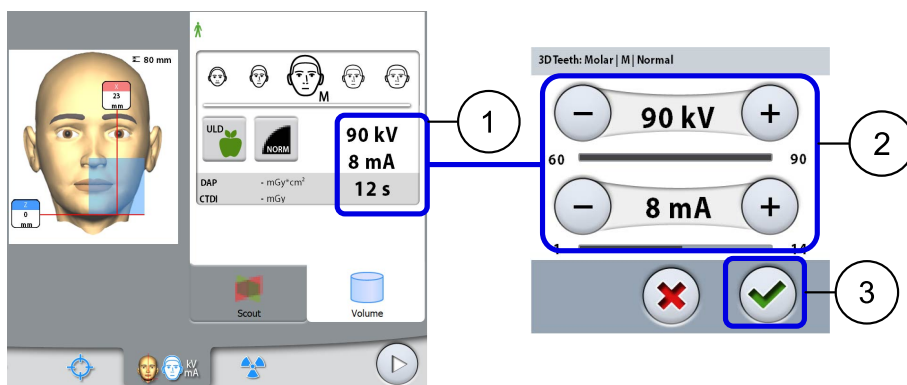
**POZNÁMKA**

Postup trvalé změny přednastavených expozičních hodnot popisuje část "Programy (2100)" na str. 64.

8.6 Výběr korekce pohybu pacienta**Kroky**

1. Toto tlačítko slouží k výběru funkce CALM pro korekci vlivů pohybu pacienta.

Jedná se o algoritmus, který během expozice monitoruje případný pohyb pacienta a následně kompenzuje vliv tohoto pohybu na výsledek rekonstrukce obrazu.

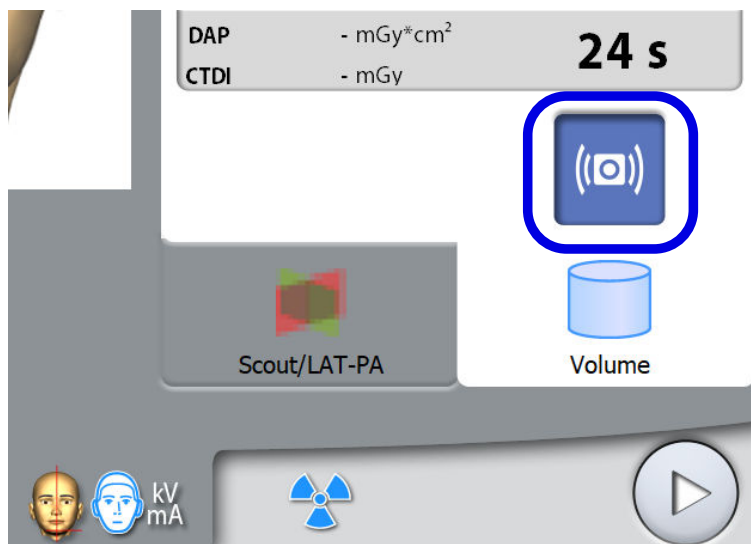

POZNÁMKA


Algoritmus CALM slouží pouze pro použití s živými pacienty a nedoporučuje se jej používat k účelům, jako je například snímkování zahrnující anorganické vzorky či kalibrační fantom.

8.7 Úprava polohy objemu

Polohy objemu jsou přednastavené z výroby na základě normalizovaného pacienta. Jelikož se však anatomické struktury každého skutečného pacienta vzájemně liší, je nutné vždy ověřit, zda objem ve výchozí poloze skutečně pokrývá oblast zájmu konkrétního pacienta. Pokud tomu tak není, upravte polohu objemu dle pacientovy anatomie. Polohovací světla a ilustrace na dotykové obrazovce vám s tímto procesem pomůžou.

POZNÁMKA

Následující ilustrace jsou pouze orientační. Během úpravy polohy objemu se polohovací světlo přesouvá po ploše pacientova obličeje. Polohovací světla na ilustracích odpovídají pouze přednastavené poloze objemu a vaše úpravy polohy objemu nezpůsobí jejich odpovídající aktualizaci.


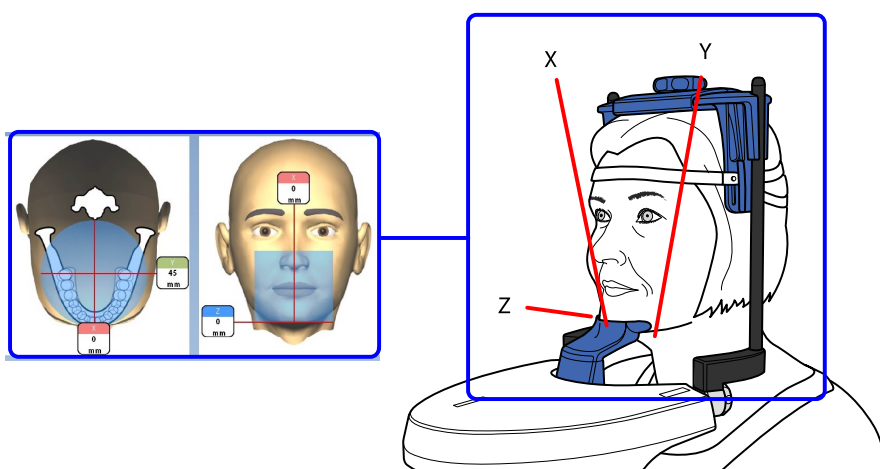


Pro zapnutí polohovacích světel (nejsou-li již zapnutá) proveďte jeden z následujících kroků:

A) Stiskněte ruční kolečko na spodní straně opěrného stolku pacienta.

B) Stiskněte kterýkoli z ovládacích prvků polohování (tlačítko nebo joystick).

Světla po dvou minutách automaticky zhasnou. Pro jejich okamžité zhasnutí stiskněte polohovací joystick.

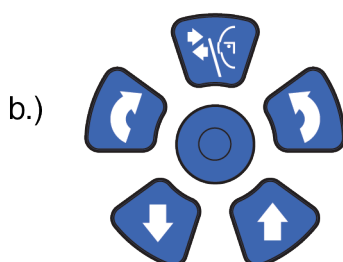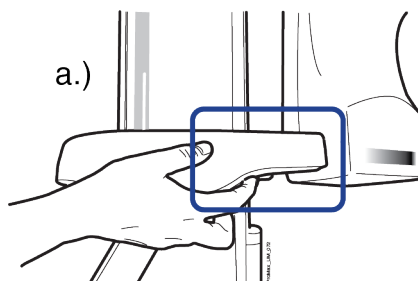

8.7.1 Vertikální přesun snímaného objemu (Z laser)



O tomto úkolu

Světlo spodního okraje snímaného objemu (Z laser) vyznačuje pozici spodního okraje snímaného objemu.

Kroky


1. Ověřte, zda nastavená výška snímaného objemu odpovídá výšce vašeho pacienta.

Pokud je třeba posunout snímaný objem nahoru nebo dolů, stiskněte tlačítko pro posun snímaného objemu nahoru (1) nebo dolů (2).
Odpovídajícím způsobem se posouvá také světlo spodního okraje snímaného objemu (Z laser) na obličej vašeho pacienta.

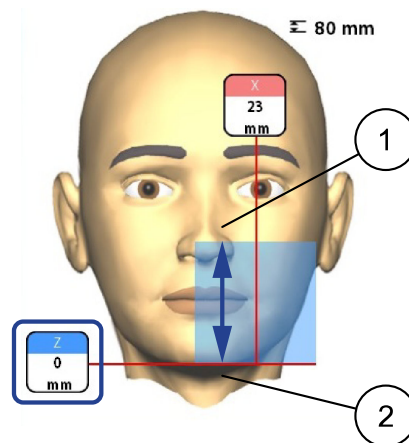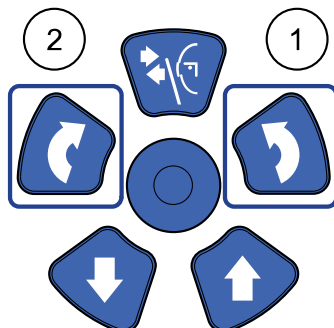

8.7.2 Horizontální posun snímaného objemu (lasery X a Y)

Světla středu objemu se kříží ve středu snímaného objemu. Zatímco je pacient umístěn v rentgenovém přístroji, světla středu objemu utváří červené linie na přední (přední světlo = laser X) a levé (postranní světlo = laser Y) straně pacientovy hlavy.


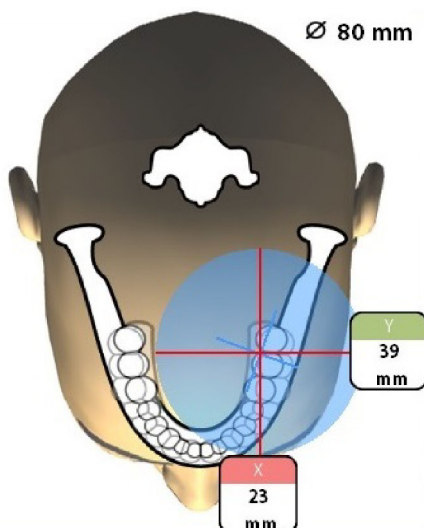


Ověřte, zda nastavená výška snímaného objemu odpovídá výšce vašeho pacienta. Potřebujete-li polohu objemu upravit, postupujte následovně.

8.7.2.1 Přední světlo (laser X)


Potřebujete-li posunout snímaný objem vlevo či vpravo (z vašeho pohledu):

- Posuňte polohovací joystick vlevo či vpravo (z vašeho pohledu). Přední světlo (tj. střed snímaného objemu při pohledu ze předu) se odpovídajícím způsobem pohybuje po ploše pacientova obličeje.

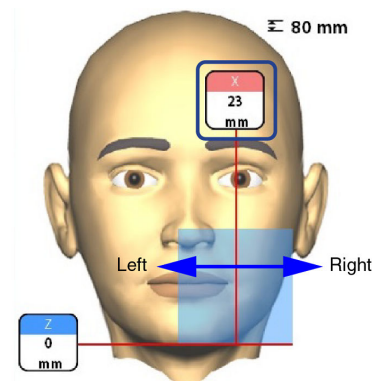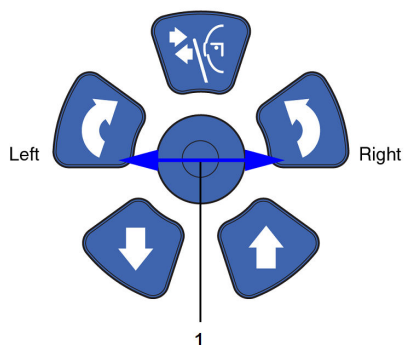


POZNÁMKA

Snímané objemy s velkými průměry ($\varnothing > 80$ mm) jsou lehce odsunuty směrem ke sloupu. Tyto snímané objemy nelze posouvat vlevo ani vpravo.

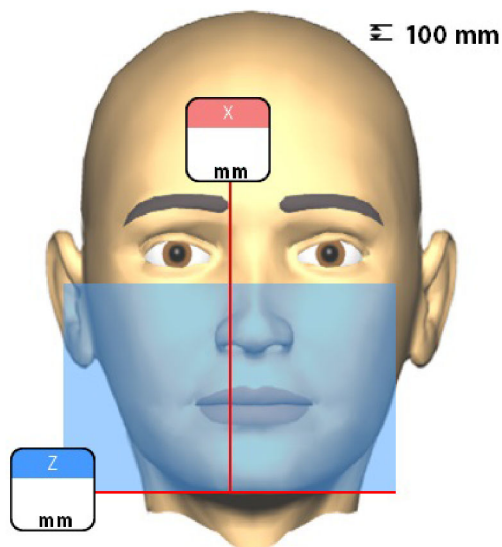**8.7.2.2 Postranní světlo (laser Y)**

Nejdříve otočte C-rameno o 90 stupňů po směru hodinových ručiček pomocí tlačítka 90° ve spodní části obrazovky. Tím získáte lepší výhled pro kontrolu polohy objemu.


Stiskněte tlačítko ještě jednou, přejete-li si otočit C-rameno zpět do jeho původní polohy.

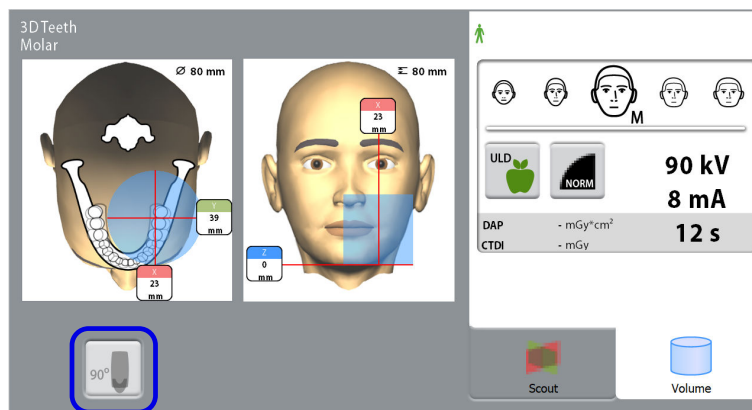

Potřebujete-li posunout snímaný objem dopředu či dozadu, proveďte jeden z následujících kroků:

- Posuňte ruční kolečko na spodní straně opěrného stolku pacienta
- Posuňte polohovací joystick směrem k sobě nebo od sebe


Postranní světlo (laser Y, tj. střed snímaného objemu při pohledu ze strany) se odpovídajícím způsobem pohybuje po ploše pacientova obličeje.

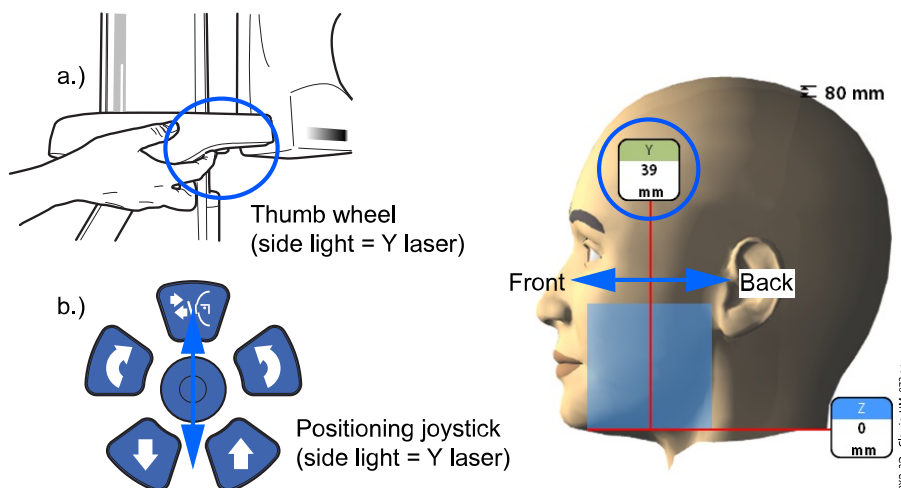

POZNÁMKA

PROGRAMY ZUB A CHRUP:

Řezákové světlo vyznačuje přední okraj snímaného objemu při výběru čelní polohy.

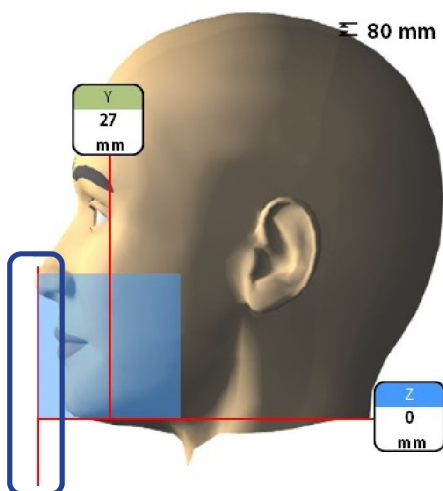

POZNÁMKA

Pohyb polohovacím joystickem řezákové světlo zhasne.

8.8 Pořízení průzkumného snímku nebo 2D pohledu (LAT, PA nebo LAT-PA)

O tomto úkolu

POZNÁMKA

Postup zapnutí a úpravy přednastavených expozičních hodnot popisuje část "Programy (2100)" na str. 64.

Před samotným pořízením 3D snímku zvoleného snímaného objemu můžete nejprve pořídit průzkumný snímek nebo 2D zobrazení (LAT, PA nebo LAT-PA). Získáte tak příležitost zkontrolovat umístění objemu nebo, je-li to nezbytné, potvrdit potřebu pořízení 3D expozice.

POZNÁMKA

V případě snímku složeného z několika objemů je možnost pořízení průzkumného snímku dostupná pouze pro první snímaný objem (1/2).

POZNÁMKA

2D zobrazení jsou dostupná pouze u některých programů.


POZNÁMKA

Ujistěte se, že jste v aplikaci Romexis vybrali správného pacienta a správný expoziční režim.

Kroky



1. Vyberte zobrazení, které si přejete pořídit.

Pro pořízení LAT-PA zobrazení vyberte obě tlačítka současně (LAT i PA).

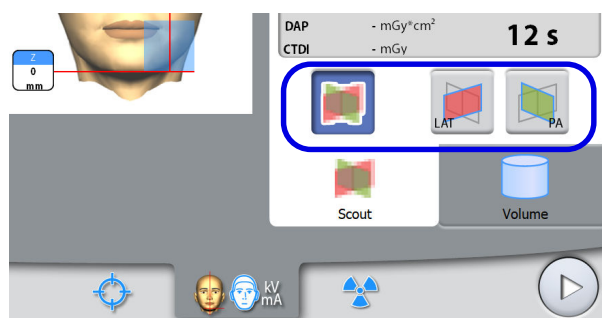

2. Vyberte symbol radiace nebo tlačítko pro pokračování.


Zatímco se bude rentgenový systém připravovat na expozici, na dotykové obrazovce a expozičním tlačítku budou blikat zelená světla. Jakmile bude rentgenový systém připraven na expozici, tato zelená světla přestanou blikat a začnou svítit soustavně.

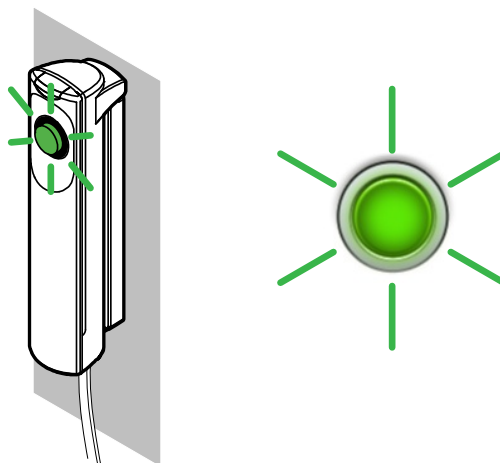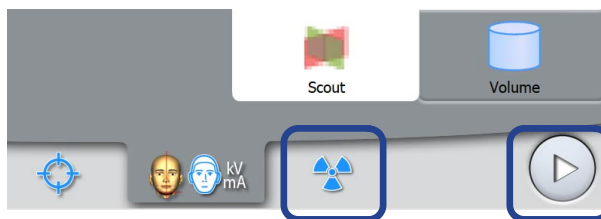

3. Požádejte pacienta, aby se nehýbal.
4. Přejděte do stíněného prostoru.
5. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po celou dobu trvání expozice.


Během expozice se na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce rozsvítí žlutá výstražná světla varující před radiací a uslyšíte výstražný tón varující před radiací.

Kromě toho se na dotykové obrazovce zobrazí také výstražný symbol varující před radiací.

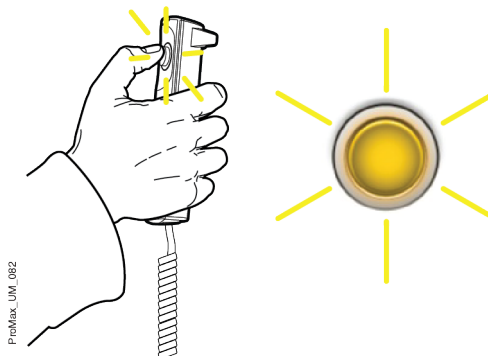

Snímek se zobrazí na obrazovce počítače. V případě potřeby můžete dodatečně upravit polohu malých objemů, viz níže.

6. Použijte symboly plus a mínus, které se zobrazí na dotykové obrazovce.

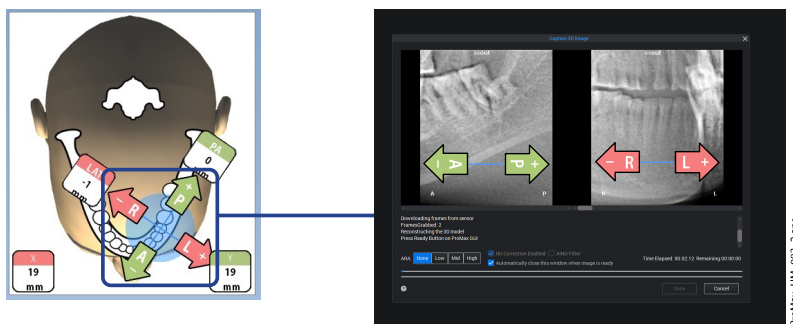

7. Pořídte novou expozici podle postupu uvedeného výše.
Postup opakujte, dokud nebude snímáný objem uveden do správné polohy.

Výsledky

POZNÁMKA

Funkce průzkumného zobrazení při použití s programy Jaw (Čelist) a Face (Obličej) produkuje oproti použití s programy Tooth (Zub) a Teeth (Chrup) vzhledově odlišné výsledky.



POZNÁMKA

Pokyny pro nastavení výchozího průzkumného úhlu při použití s programem Tooth (Chrup) naleznete v části "Provozní nastavení (1300)" na str. 58.

8.9 Pořízení 3D expozice

O tomto úkolu



POZNÁMKA

Ujistěte se, že jste v aplikaci Romexis vybrali správného pacienta a správný expoziční režim.

Kroky

1. Ujistěte se, že jste vybrali kartu **Volume (Objem)**.
2. Vyberte symbol radiace nebo tlačítko pro pokračování.


Zatímco se bude rentgenový systém připravovat na expozici, na dotykové obrazovce a expozičním tlačítku budou blikat zelená světla. Jakmile bude rentgenový systém připraven na expozici, tato zelená světla přestanou blikat a začnou svítit soustavně.

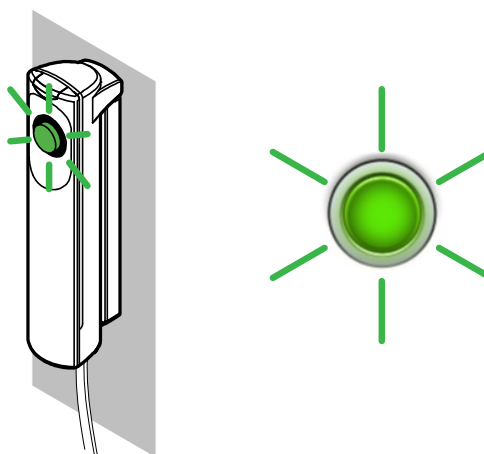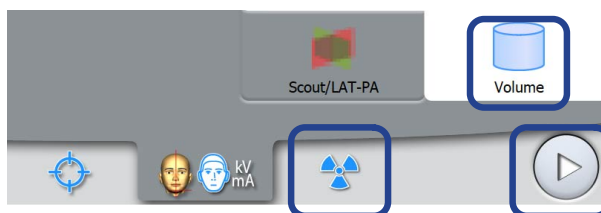

3. Požádejte pacienta, aby se nehýbal.
4. Přejděte do stíněného prostoru.
5. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po celou dobu trvání expozice.

Během expozice se na expozičním tlačítku a dotykové obrazovce rozsvítí žlutá výstražná světla varující před radiací a uslyšíte výstražný tón varující před radiací.

Kromě toho se na dotykové obrazovce zobrazí také výstražný symbol varující před radiací.

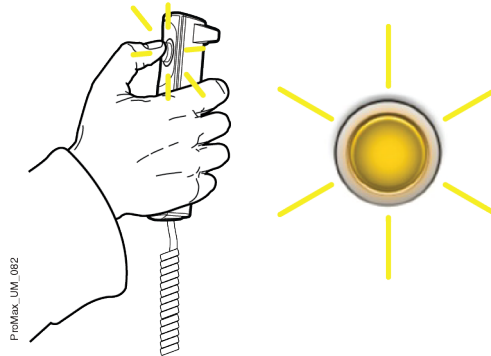

C-rameno se otáčí kolem pacientovy hlavy.

- Rentgenové přístroje KaVo ProXam 3DQ:

V případě pořizování dvou vertikálních objemových snímků je objem dole snímán jako první a objem nahoře je snímán jako druhý. Vertikální přesun C-ramene mezi oblastmi jednotlivých snímaných objemů je automatický. Vertikální stoupání C-ramene je doprovázeno varovným zvukovým tónem.

- V případě pořizování dvou horizontálních objemových snímků je objem nalevo snímán jako první a objem napravo je snímán jako druhý.

POZNÁMKA

Neuvolňujte expoziční tlačítko, dokud není dokončena i druhá expozice.


POZNÁMKA

Během expozice udržujte vizuální i sluchový kontakt s pacientem a rentgenovým přístrojem. Pokud by se C-rameno během expozice zastavilo, nebo se nepohybovalo správně, okamžitě uvolněte expoziční tlačítko.

Výsledky

Snímek se zobrazí na obrazovce počítače.

- Čas zpracování snímku závisí na zvoleném nastavení. Například při výběru funkce ULD (ultra nízká dávka) trvá zobrazení výsledného snímku o něco déle.
- V případě pořízení dvou objemových snímků musí být v programu Romexis povolena funkce sešívání obrazu.

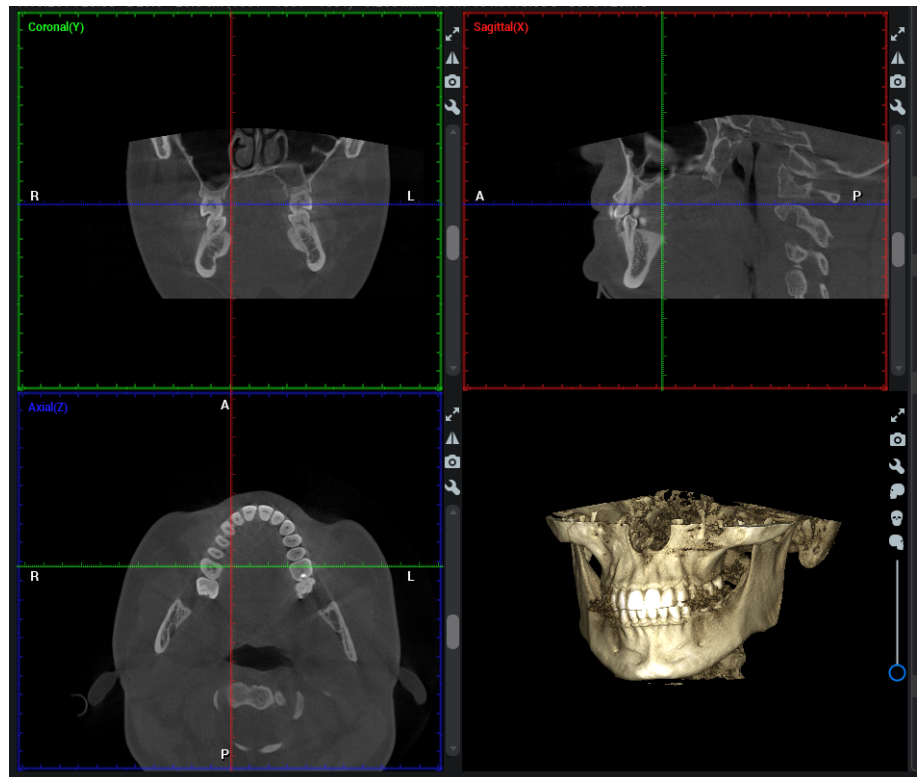

Co dál

Sejměte fixační popruhy (pokud byly použity). Uvolněte pacientovu hlavu z hlavové opěrky otočením nastavovacího ručního šroubu na horní straně.

Odveďte pacienta z dosahu rentgenového přístroje.

9 Nastavení

POZNÁMKA

Některá nastavení lze použít k ovlivnění provozu přístroje. Nikdy nepoužívejte funkce, které dokonale neznáte.

POZNÁMKA

Obsah jednotlivých zobrazení závisí na konfiguraci přístroje. Zde uvedená zobrazení jsou pouze ilustrativní.




Pro vstup do nabídky nastavení vyberte symbol nastavení na hlavní obrazovce.

Nastavení, která má uživatel možnost upravovat:

- Uživatel
- Program
- About (O přístroji)

Nastavení, která smí zadávat pouze servisní pracovník (vyžadováno heslo):

- Technical (Technická nastavení)

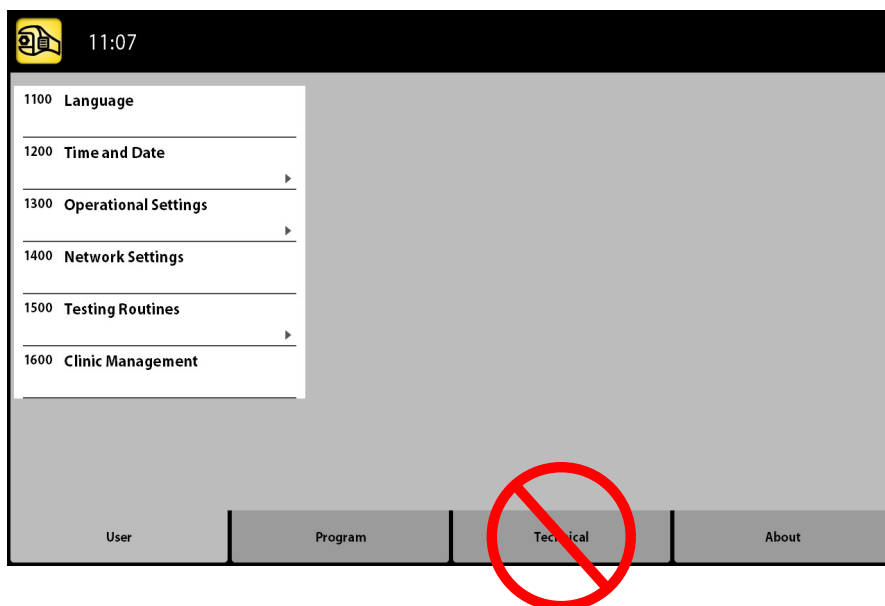

Pro návrat do hlavní obrazovky vyberte symbol nastavení v levém horním rohu.

9.1 Uživatelská nastavení

9.1.1 Jazyk (1100)

O tomto úkolu

Pro změnu lokalizace rentgenového přístroje následujte tyto kroky:


Kroky

1. Vyberte **User > 1100 Language (Uživatel > 1100 Jazyk)**.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

Dostupné jazyky:

- Angličtina
- Čínština (zjednodušená)
- Čínština (tradiční)
- Dánština
- Nizozemština
- Finština
- Francouzština
- Němčina
- Italština
- Japonština
- Korejština
- Norština
- Polština
- Ruština
- Španělština
- Švédština
- Turečtina

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

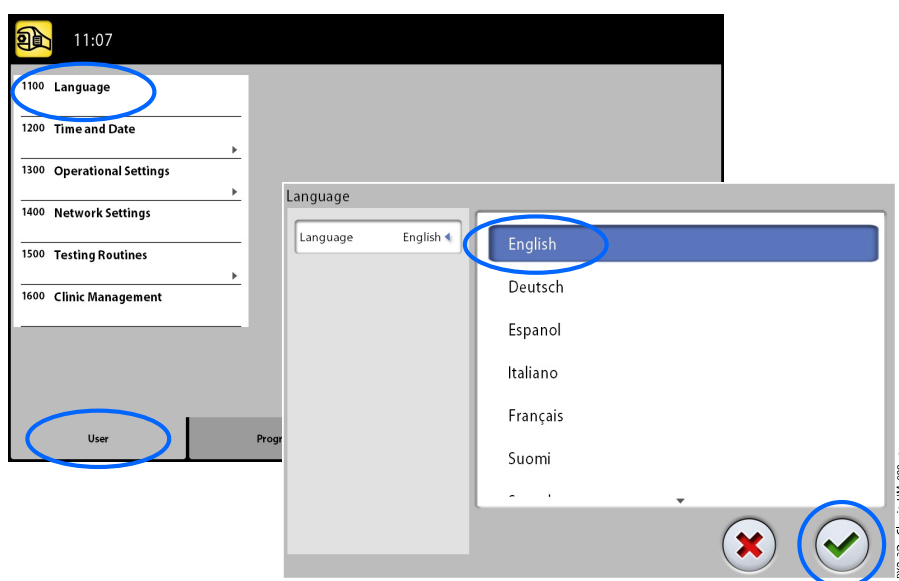

9.1.2 Datum a čas (1200)

9.1.2.1 Formát zobrazení času

O tomto úkolu


Následujícím postupem nastavíte formát zobrazení času.

Kroky

1. Vyberte **User > 1200 Time and Date > 1210 Set System Time and Time / Date Display Format > Time Display Format (Uživatel > 1200 Datum a**

čas > 1210 Nastavení systémového času a formátu zobrazení času/data > Formát zobrazení času).

2. Vyberte požadovaný formát zobrazení času.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

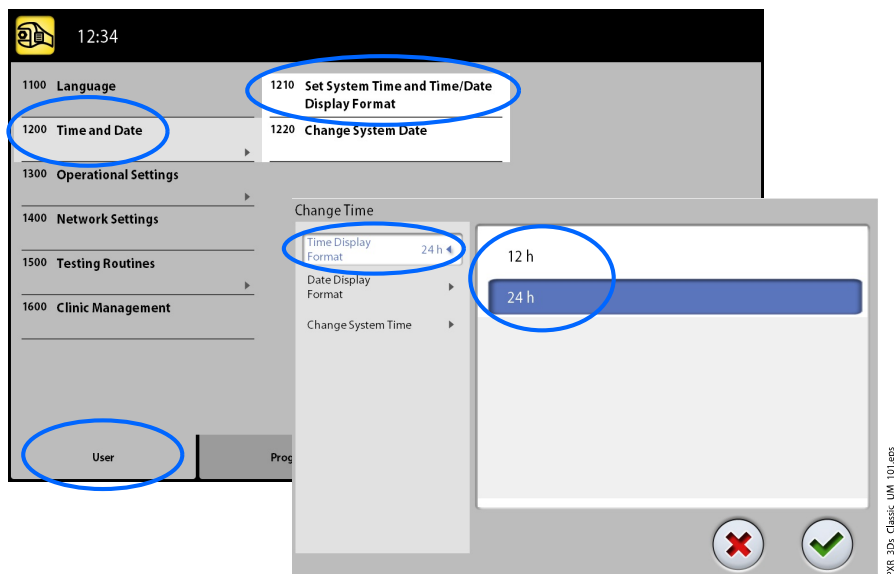


9.1.2.2 Formát zobrazení data

O tomto úkolu

Následujícím postupem nastavíte formát zobrazení data.

Kroky

1. Vyberte User > 1200 Time and Date > 1210 Set System Time and Time / Date Display Format > Time Display Format (Uživatel > 1200 Datum a čas > 1210 Nastavení systémového času a formátu zobrazení času/data > Formát zobrazení data).
2. Vyberte požadovaný formát zobrazení času.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

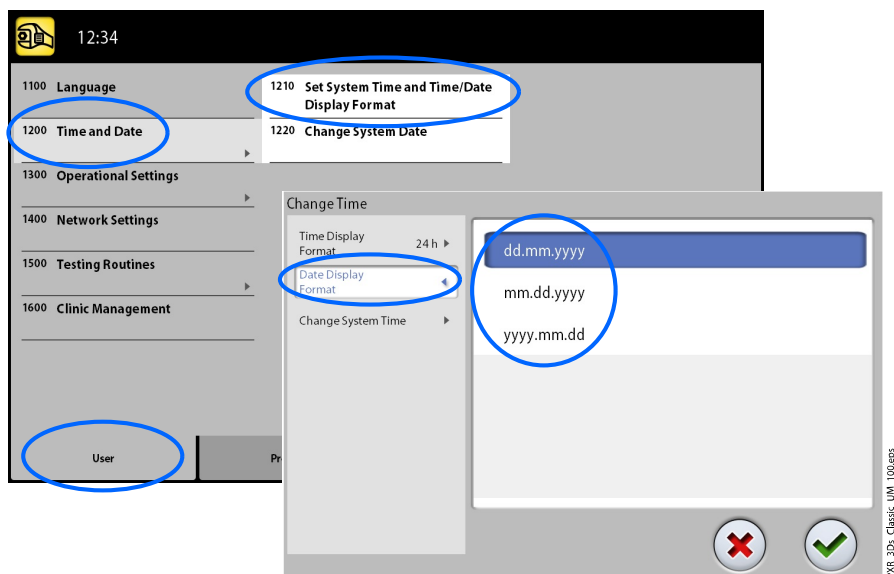


9.1.2.3 Nastavení času

O tomto úkolu

Následujícím postupem nastavíte čas.

Kroky

1. Vyberte **User > 1200 Time and Date > 1210 Set System Time and Time/Date Display Format > Time Display Format (Uživatel > 1200 Datum a čas > 1210 Nastavení systémového času a formátu zobrazení času/data > Změnit systémový čas)**.
2. Použijte tlačítka plus a mínus pro změnu času.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

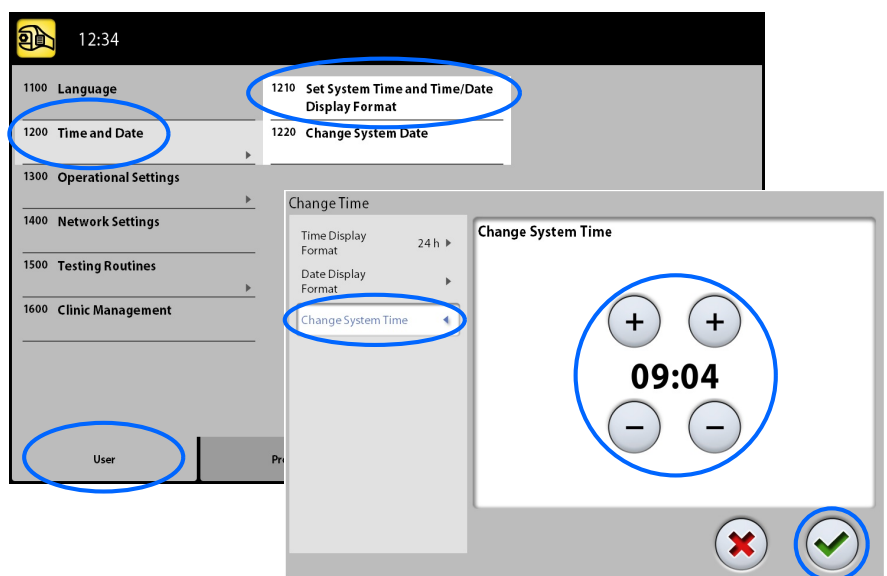

POZNÁMKA

Výchozí nastavená hodnota času odpovídá místnímu času výrobní linky. Před použitím rentgenového přístroje nastavte čas na správnou hodnotu.

9.1.2.4 Nastavení data


O tomto úkolu

Následujícím postupem nastavíte datum.

Kroky

1. Vyberte **User > 1200 Time and Date > 1220 Change System Date (Uživatel > 1200 Datum a čas > 1220 Změnit systémové datum)**.
2. Vyberte den nebo použijte tlačítka šipek pro změnu měsíce (jednoduché šipky) či roku (dvojitě šipky).

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

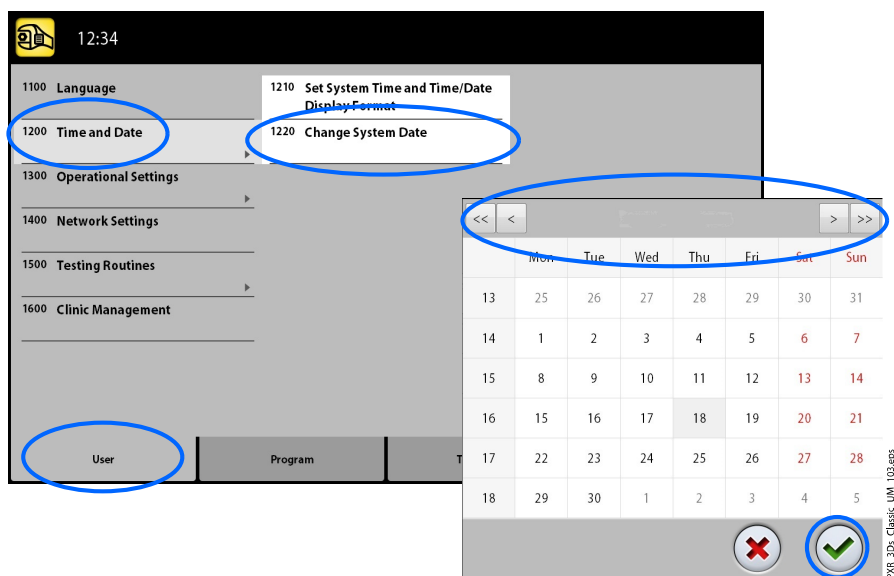

9.1.3 Provozní nastavení (1300)

9.1.3.1 Režim

O tomto úkolu

Následujícím postupem vyberete režim.


Kroky

1. Vyberte **User > 1300 Operational Settings > 1310 Use Mode (Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1310 Režim použití)**.

2. Vyberte požadovaný režim.

V režimu Demo Mode (Demonstrační režim) můžete procvičovat nebo předvádět funkce rentgenového přístroje bez radiace i bez připojení k PC.

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

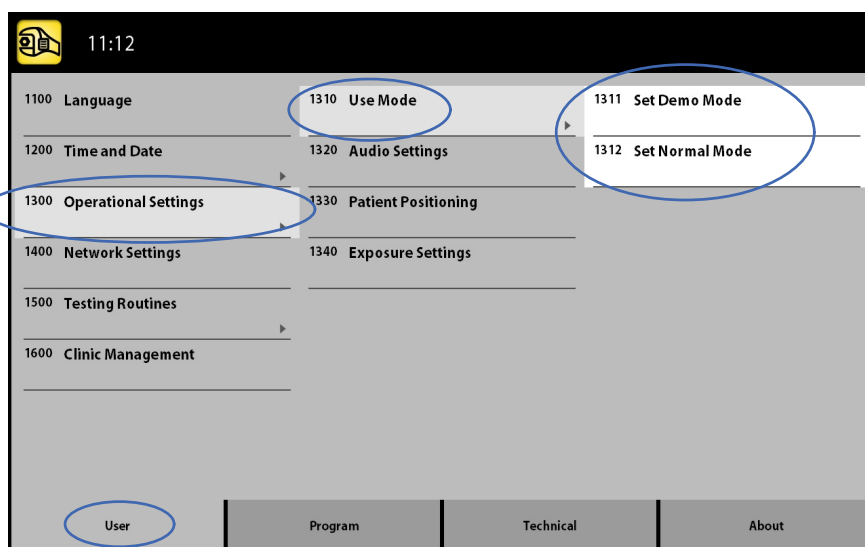


9.1.3.2 Nastavení zvuku

O tomto úkolu

Pro správu nastavení zvuku následujte tyto kroky:

Kroky

1. Vyberte **User > 1300 Operational Settings > 1320 Audio Settings** (**Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1320 Nastavení zvuku**).
2. Vyberte:
 - **Alarm Volume (Hlasitost alarmu)**
Toto nastavení upravuje hlasitost tónu varujícího před radiací. Použijte tlačítko plus nebo minus pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 - **Touch Volume (Hlasitost zpětné vazby)**
Toto nastavení upravuje hlasitost zvukového signálu, který se ozývá při každém výběru prostřednictvím dotykové obrazovky. Použijte tlačítko plus nebo minus pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. Nechcete-li tuto funkci používat, nastavte úroveň hlasitosti na hodnotu 0 %.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

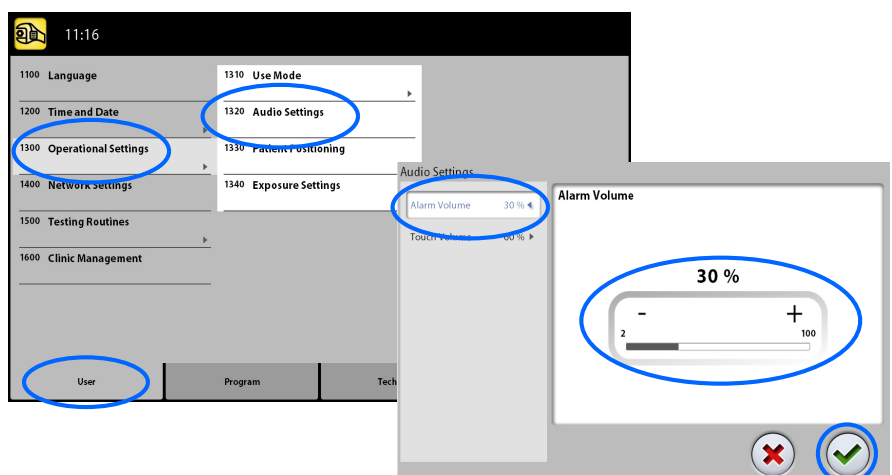


9.1.3.3 Polohování pacienta

O tomto úkolu

Pro správu nastavení procesu polohování pacienta následujte tyto kroky.

Kroky

1. Vyberte **User > 1300 Operational Settings > 1330 Patient Positioning** (Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1330 Polohování pacienta).

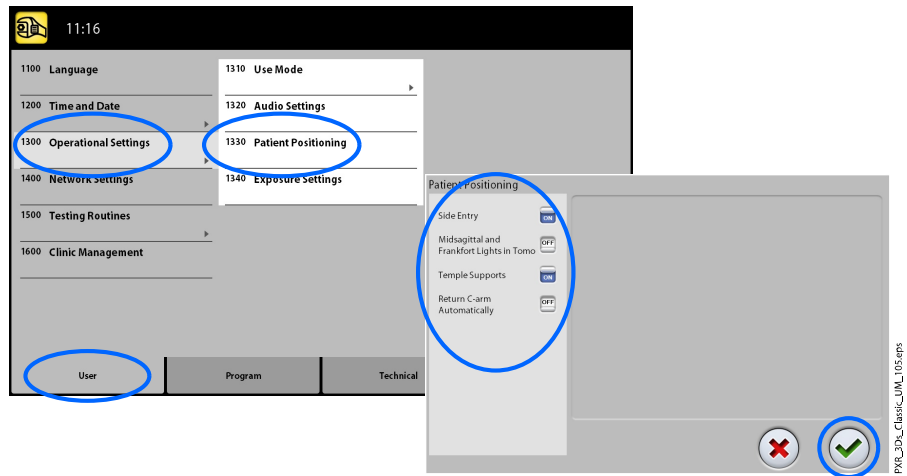

2. Zapněte nebo vypněte možnost(i) nastavením hodnoty ON nebo OFF:



- **Side Entry (Boční vstup)**

Vypněte (hodnota OFF) tuto možnost, pokud si nepřejete používat otevřenou (s plným výhledem) vstupní polohu pacienta. To může být nezbytné v případě, kdy nedostatek prostoru znemožňuje pohyb C-ramene směrem vzad.

- **Midsagittal and Frankfort Lights in Tomo (Středosagitální a Frankfortova světla při tomografii)**

Zapněte (hodnota ON) tuto možnost, pokud si přejete během pořizování 3D expozice používat světla středosagitální a frankfortovy roviny.

- **Temple Supports (Spánkové opěrky)**

Vypněte (hodnota OFF) tuto možnost, pokud si nepřejete používat spánkové opěrky.

- **Return C-arm Automatically (Automatický návrat C-ramene)**

Zapněte (hodnota ON) tuto možnost, pokud si přejete nastavit rentgenový přístroj tak, aby se C-rameno na konci expozičního cyklu automaticky navracelo do své výchozí polohy. Automatická funkce však pracuje pouze v případě, že expoziční tlačítko bylo stlačeno během celé expozice.

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.


9.1.3.4 Nastavení expozice

O tomto úkolu

Pro správu nastavení expozice následujte kroky uvedené níže.

Kroky

1. Vyberte **User > 1300 Operational Settings > 1340 Exposure Settings (Uživatel > 1300 Provozní nastavení > 1340 Nastavení expozice)**.

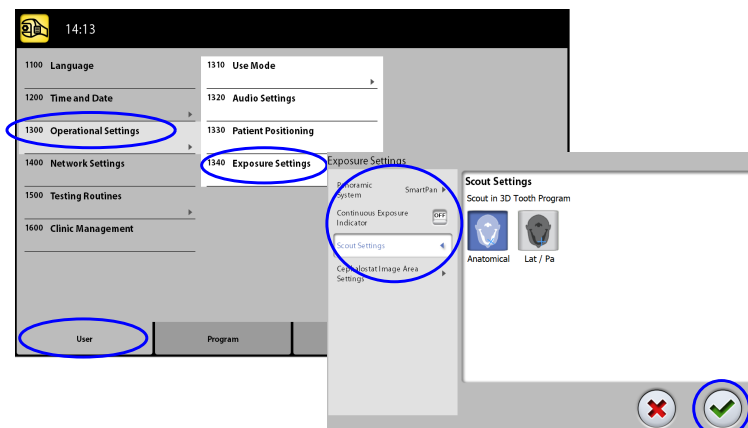

2. Vyberte:

- **Continuous Exposure Indicator (Soustavný indikátor expozice)**

Zapněte (hodnota ON) tuto možnost, pokud si přejete nastavit rentgenový přístroj tak, aby žlutá výstražná světla varující před radiací svítila během pořizování expozice nepřetržitě (namísto blikání).

Upozorňujeme, že toto nastavení ovlivňuje veškerá indikační světla, kterými je daný rentgenový přístroj vybaven (indikační světlo na ručním expozičním tlačítku i veškerých případných nástěnných expozičních tlačítkách a také vzdálený expoziční maják).

- **Nastavení průzkumného snímkování**

Vyberte výchozí úhel (anatomický nebo LAT-PA) pro průzkumné snímky v 3D programu Tooth (Zub).

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

9.1.4 Nastavení sítě (1400)


O tomto úkolu

Následujícím postupem zobrazíte nastavení sítě.

Kroky

1. Vyberte **User > 1400 Network Settings (Uživatel > 1400 Nastavení sítě)**.
2. Vyberte, které položky nastavení sítě si přejete zobrazit.

3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

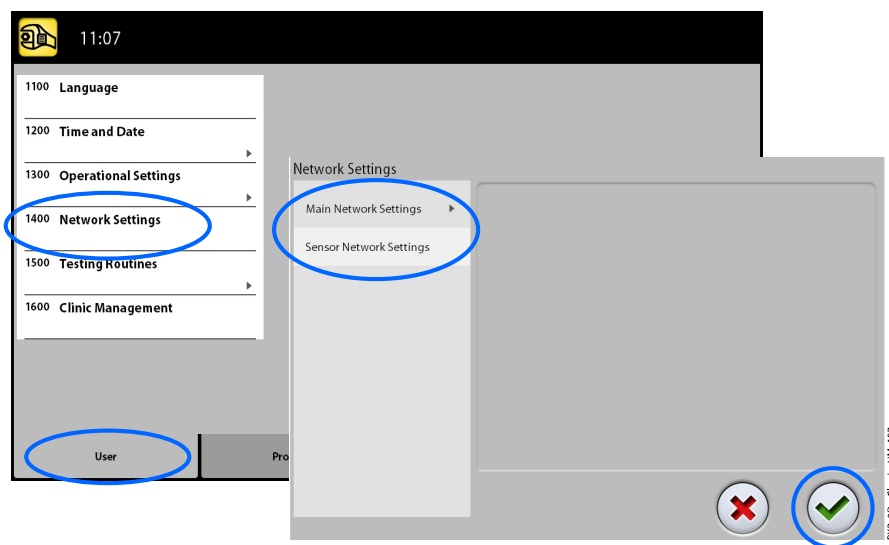

POZNÁMKA

Nastavení sítě smí měnit jen servisní technik nebo místní správce.

9.1.5 Zkušební procedury (1500)

9.1.5.1 Zkušební expozice


O tomto úkolu

Následujícím postupem pořídíte zkušební expozici.

Kroky

1. Vyberte **User > 1500 Testing Routines > 1510 Test Exposure (Uživatel > 1500 Zkušební postupy > 1510 Zkušební expozice)**.
2. Použijte tlačítka plus a mínus pro nastavení požadovaných expozičních hodnot.
3. Vyberte tlačítko **SET (Nastavit)**.
4. Přejděte do stíněného prostoru.
5. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po dobu trvání expozice.
C-rameno se při pořizování zkušební expozice nebude hýbat.

6. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

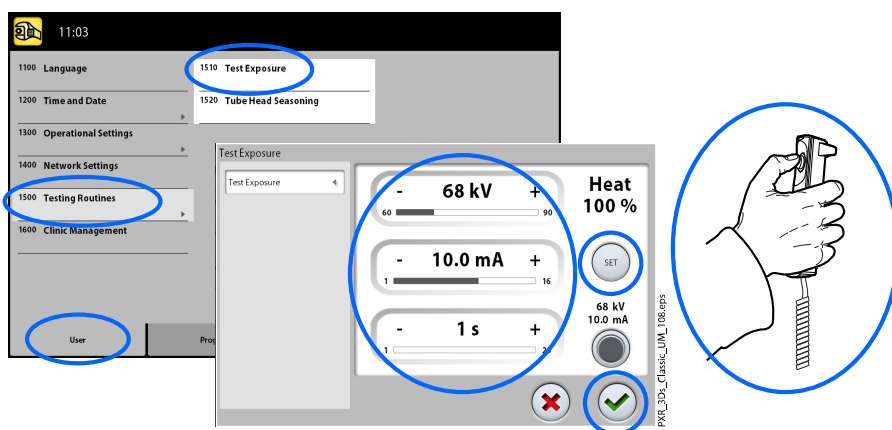

9.1.5.2 Předehřátí rentgenové hlavy

O tomto úkolu

Předehřátí rentgenové hlavy provedete následujícím způsobem.

Kroky


1. Vyberte **User > 1500 Testing Routines > 1520 Tube Head Seasoning (Uživatel > 1500 Zkušební postupy > 1520 Předehřátí rentgenové hlavy)**.

Tato volba vám umožní spustit proces předehřátí rentgenové lampy, tj. proces přípravy rentgenové hlavy. To je nezbytné vždy, když rentgenový přístroj nebyl používán po dobu jednoho týdne nebo déle a/nebo v případě výskytu chybové zprávy **E332** (Silné probíjení napříč rentgenovou lampou).

2. Vyberte tlačítko **Start**.
3. Přejděte do stíněného prostoru.
4. Až se zobrazí slovo *Ready* (Připraveno), stiskněte expoziční tlačítko.

Můžete stisknout a držet expoziční tlačítko po celou dobu procesu, případně palec z expozičního tlačítka sejmout po zobrazení slova *Wait* (Čekejte). Poznamenejme, že proces předehřátí zabere několik minut. Po úspěšném dokončení procesu se zobrazí zpráva **OK**.

5. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

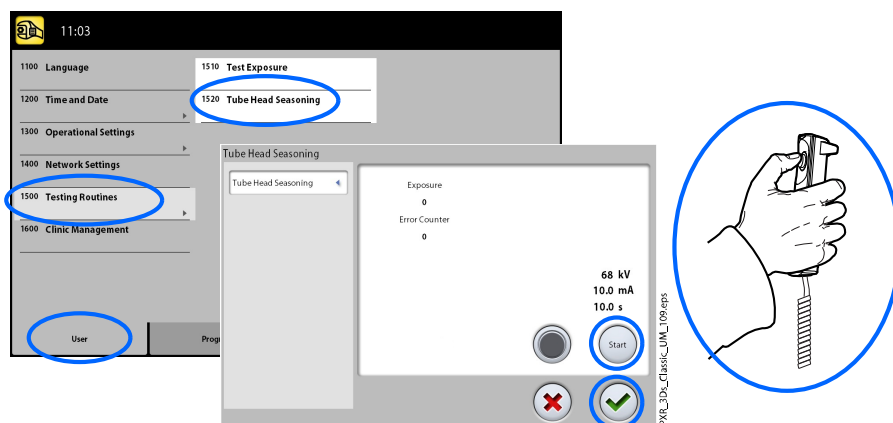

POZNÁMKA

Zobrazí-li se po úspěšném procesu přehřátí chybová zpráva E332 (Silné probíjení napříč rentgenovou lampou) znovu, kontaktujte servisního technika a požádejte o asistenci.

9.2 Nastavení programů**9.2.1 Programy (2100)****9.2.1.1 Zapínání a vypínání programů****O tomto úkolu**

Následujícím postupem provedete zapnutí nebo vypnutí programu či programů.

Kroky

1. Vyberte **Program > 2100 Programs (Program > 2100 Programy)**.
2. Vyberte skupinu programu (např. 2D Panoramic).
3. Nastavte stav typu programu (např. Interproximal) na hodnotu ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto).
4. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

POZNÁMKA

Tato funkce je dostupná pro ty programy, které byly aktivovány v nabídce 2300 Licences (2300 Licence).

9.2.1.2 Trvalá úprava přednastavených expozičních hodnot**O tomto úkolu**

Pro trvalou změnu přednastavených expozičních hodnot následujte níže uvedené kroky.

Kroky

1. Vyberte **Program > 2100 Programs (Program > 2100 Programy)**.
2. Vyberte programovou skupinu (např. 2110 2D Panoramic — 2D Panoramatický).
3. Vyberte typ programu (např. Interproximal — Mezizubní).
4. Vyberte expoziční hodnoty, které si přejete upravit (např. 70kV / 10 mA pro pacienty s velikostí M).



- U 2D panoramatických programů můžete vybrat také tlačítko MultiView, pokud si přejete upravit přednastavené hodnoty režimu snímkování MultiView.



- U 3D programů jsou expoziční hodnoty určeny odděleně pro jednotlivá rozlišení snímků. Nedostupná rozlišení snímků mají svá tlačítka zobrazena v tlumených barvách. Vyberte také tlačítko ULD (Ultra nízká dávka), pokud si přejete upravit přednastavené hodnoty funkce ULD.

5. Použijte tlačítka plus a mínus pro nastavení požadovaných expozičních hodnot.
6. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.
7. Dle potřeby postup opakujte pro další typy programů, velikostí pacientů nebo rozlišení snímků (3D).
8. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

POZNÁMKA

Vždy se snažte minimalizovat dávku záření, které bude pacient vystaven.

POZNÁMKA

Expoziční hodnoty můžete vrátit na přednastavené hodnoty z výroby (tj. přepsat nastavení, které jste provedli Vy sami) výběrem možnosti Program > 2500 Reset to Factory Defaults (Program > 2500 Obnovit tovární nastavení).

POZNÁMKA

Dočasnou úpravu přednastavených expozičních hodnot lze provést postupem popsaným v části "Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici" na str. 41.



9.2.2 Funkce programu (2200)


O tomto úkolu

Pro správu nastavení programu následujte níže uvedené kroky.

Kroky

1. Pro správu nastavení programu vyberte **Program > 2200 Program Features (Program > 2200 Funkce programu)**.

Podrobnosti ohledně jednotlivých nastavení naleznete v Návodu k použití věnované dané funkci.

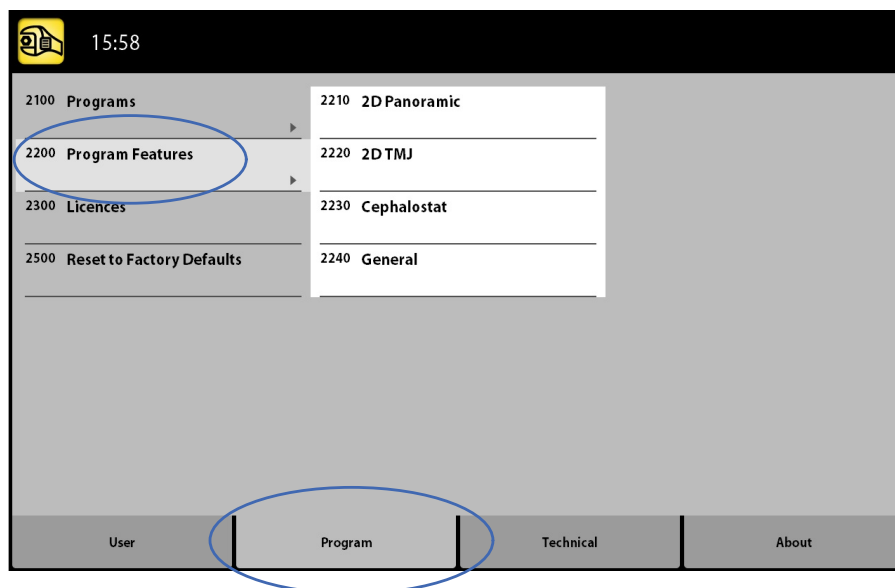

9.2.3 Licence (2300)


O tomto úkolu

Pro aktivaci programové licence následujte kroky popsané níže.

Kroky

1. Vyberte **Program > 2300 Licences (Program > 2300 Licence)**.
2. Vyberte licenci, kterou si přejete aktivovat:
 - Subscription licence (Licence formou předplatného, umožňuje aktivovat danou licenci pouze na určené časové období. Licenci formou předplatného lze po vypršení platnosti reaktivovat pomocí kódu.)
 - Trial licence (Zkušební licence, dostupná pouze pro jedinou aktivaci. Aktivuje všechny licence na dobu tří měsíců. Zkušební licence vyprší na konci doby platnosti nebo zkonsumováním přiděleného počtu vytvořených snímků. Lze reaktivovat pomocí licence formou předplatného.)
 - SmartPan (Základní 2D panoramatické, temporomandibulární (TMJ) a dutinové programy pomocí 3D snímače.)
 - Horizontal and Vertical Segmenting (Horizontální a vertikální segmentace. Snížená expoziční oblast pro 2D panoramatické programy.)
 - Bitewing Panoramic Program (Skutečný extraorální bitewingový program.)
 - Advanced Panoramic Programs (Pokročilé panoramatické programy. Přídavné 2D panoramatické, temporomandibulární (TMJ) a dutinové programy.)
 - 2D Views for 3D (2D zobrazení pro 3D. LAT, PA a LAT-PA zobrazení pro 3D programy.)
 - 3D ENT Programs (3D programy pro ORL.)
 - 3D Endodontic Imaging Mode (Endodontické rozlišení snímků pro 3D snímky malých objemů.)

- ProTouch Desktop (Virtuální ovládací panel umožňující pořizování expozic.)
 - CALM (Algoritmus pro korekci vlivu pacientova pohybu pro 3D programy.)
3. Zadejte licenční kód, který jste pro tuto licenci na tomto rentgenovém přístroji obdrželi.
 4. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.
 5. Postup dle potřeby opakujte pro další programové licence.
 6. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

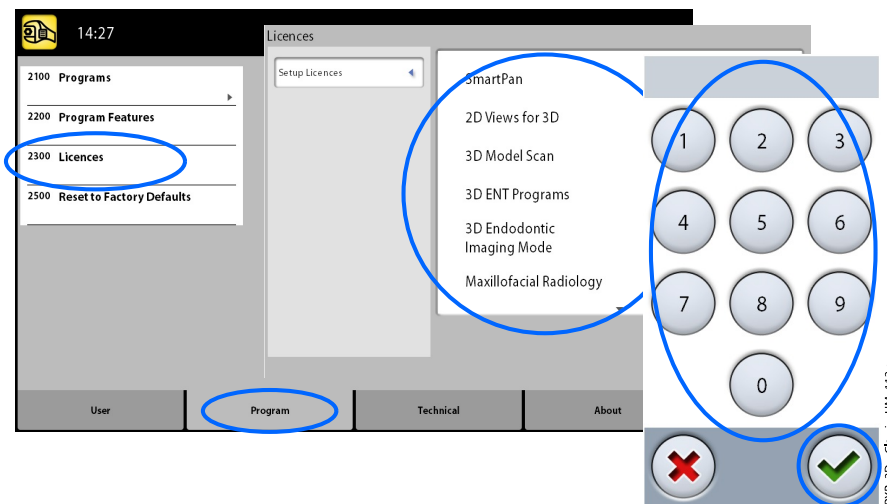

9.2.4 Obnova továrního nastavení (2500)

O tomto úkolu

Pro obnovení továrního nastavení následujte kroky popsané níže.


Kroky

1. Vyberte **Program > 2500 Reset to Factory Defaults (Program > 2500 Obnova továrního nastavení)**.

Tato funkce obnoví expoziční hodnoty do přednastaveného stavu z výroby (tj. přepíše nastavení, které jste prostřednictvím nabídky **Programs (2100)** provedli Vy sami).

Přednastavené expoziční hodnoty pro 3D expozice pacienta jsou uvedeny v části "Úprava expozičních hodnot pro aktuální expozici" na str. 41.


2. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

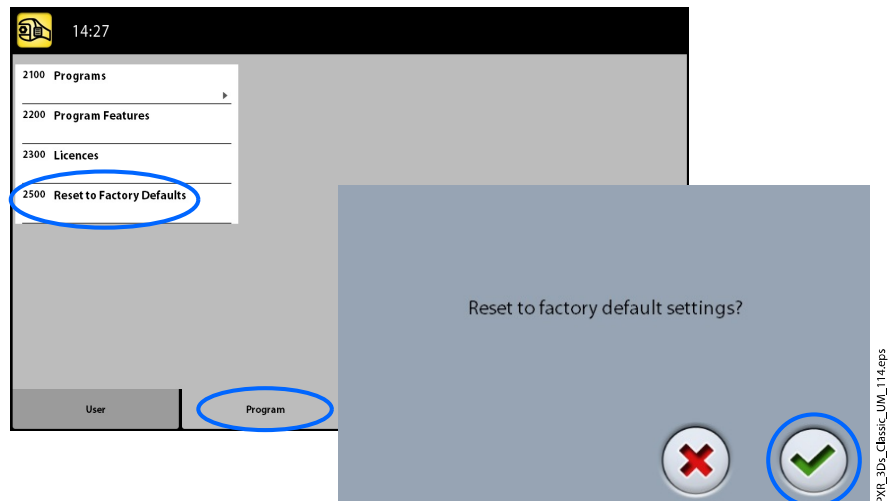

9.3 Karta About (O přístroji)

9.3.1 Informace o součástech (4100)

- **Pro zobrazení informací o součástech přístroje:**
Pro zobrazení konfigurace či verze softwaru rentgenového přístroje vyberte **About > 4100 Component Information > Show Component Information (O Přístroji > 4100 Informace o součástech > Zobrazit informace o součástech)**.
- **Pro zobrazení informací o sestavení softwaru:**
Pro zobrazení informací o sestavení softwaru vyberte **About > 4100 Component Information > Show Detailed Build Info (O Přístroji > 4100 Informace o součástech > Zobrazit podrobnosti o sestavení)**.

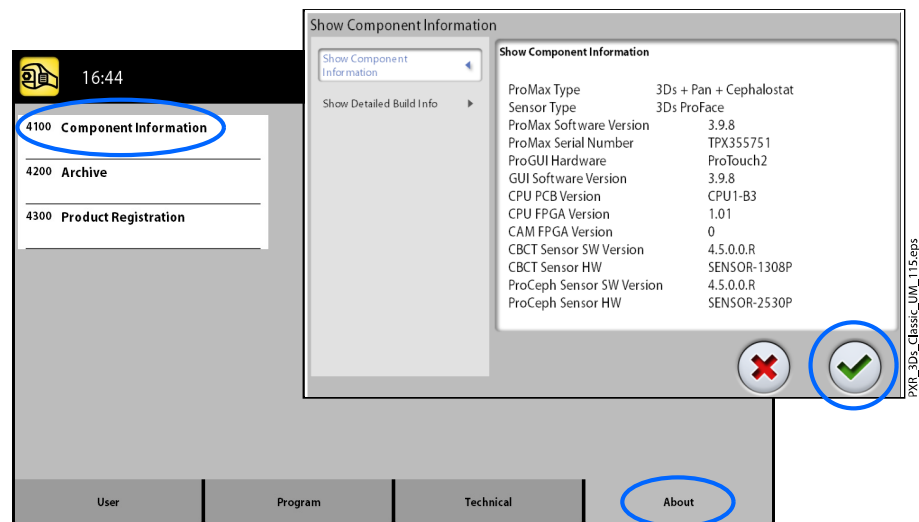

9.3.2 Archiv (4200)

- **Pro zobrazení historie chyb:**
Pro zobrazení seznamu chybových zpráv, které rentgenový přístroj vytvořil, vyberte **About > 4200 Archive > Error History (O přístroji > 4200 Archiv > Historie chyb)**. Chyby jsou zobrazeny v chronologickém pořadí, kde nejaktuálnější chybová zpráva bude vždy první odshora.

- **Pro zobrazení expozičních statistik:**

Pro zobrazení statistických údajů o rentgenovém přístroji vyberte **About > 4200 Archive > Exposure Statistics (O přístroji > 4200 Archiv > Expoziční statistiky)**.


9.3.3 Registrace produktu (4300)

O tomto úkolu

Pro registraci rentgenového přístroje na internetových stránkách společnosti KaVo následujte kroky uvedené níže.

Kroky

1. Vyberte **About > 4300 Product Registration (O produktu > 4300 Registrace produktu)**.
2. Provedte jeden z následujících kroků:
 - Na obrazovce je zobrazen QR kód. Máte-li ve svém mobilním zařízení (např. smartphone) nainstalovanou aplikaci pro čtení QR kódů, spusťte ji a podržte své zařízení ve stabilní poloze tak, aby byl QR kód udržován ve vyznačené čtecí oblasti. Internetový prohlížeč načte z QR kódu a otevře stránku společnosti KaVo určenou pro registraci produktu.
 - Přejděte na internetovou stránku pro registraci produktu společnosti KaVo <https://www.kavo.com/warranty-imaging>.
3. Vyberte tlačítko se symbolem zeleného zatržítka.

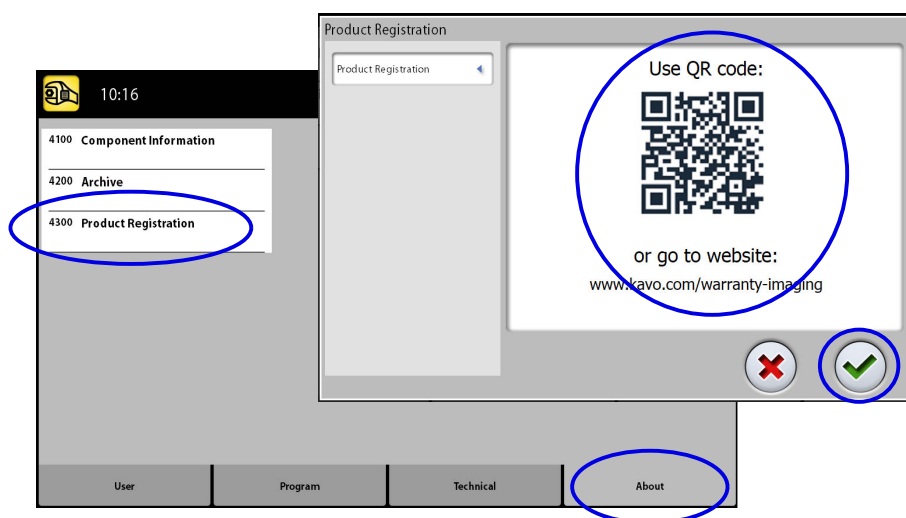

4. Postupujte podle pokynů na stránce registrace.
Nezapomeňte, že při zadávání sériového čísla rentgenového přístroje musíte zadat všechna písmena uvedená na začátku čísla.

10 Zprávy nápovědy



Rentgenový přístroj je vybaven funkcí automatické kontroly, která monitoruje provoz přístroje. Pokud systém odhalí provozní chybu, na dotykové obrazovce se zobrazí pomocná zpráva (např. H101).



Dokud není pomocná zpráva z dotykové obrazovky odstraněna, rentgenový přístroj nepřijímá žádné příkazy uživatele. Odstraňte zprávu dotykem zeleného symbolu zatržítka.

Následující seznam obsahuje veškeré pomocné zprávy, které se Vám mohou zobrazit, v číselném pořadí.

Kód	Vysvětlení		Poznámky
H101	Expoziční tlačítko	Expoziční tlačítko bylo uvolněno před dokončením expozice.	Odvedte pacienta od rentgenového přístroje, než začnete hýbat s C-ramenem. Stiskněte a držte expoziční tlačítko po celou dobu trvání expozice.
H102		Expoziční tlačítko je zablokované nebo došlo ke zkratu v jeho kabelu.	Uvolněte expoziční tlačítko. Obrat'te se na svého servisního technika, potřebujete-li provést výměnu expozičního tlačítka.
H103	PC aplikace ProTouch	PC aplikace ProTouch musí být ukončena.	Restartujte aplikaci.
H105	Nouzový vypínač	Byl stisknut nouzový vypínač.	Všechny pohyby přístroje jsou zablokovány, není generováno žádné záření. Odvedte pacienta z dosahu rentgenového přístroje. V tom případě uvolněte tlačítko nouzového zastavení a obnovte tak normální provoz.
H110	Údržba zařízení	Nadešlo datum vaší příští naplánované údržby zařízení.	Kontaktujte prosím svého servisního technika a domluvte si servisní prohlídku.
H112	Kolimátor	Zkontrolujte nastavení polohy panoramatického X-kolimátoru.	Zkontrolujte nastavení kolimátoru.
H113		Zkontrolujte nastavení šířky panoramatického X-kolimátoru.	Zkontrolujte nastavení kolimátoru.
H120	Předplatné	Blíží se konec platnosti licence s předplatným.	Obnovte prosím své předplatné, pokud si nepřejete o dostupné funkce přijít.
H121		Licence s předplatným vypršela.	Některé funkce již nebudou dostupné.
H130	Bezpečnostní oblast pacienta	Zjištěn problém s bezpečnostní oblastí pacienta.	Zkontrolujte nastavení skenu a vrstvy.

Kód	Vysvětlení		Poznámky
H142	Vertikální pohyb	Vertikální pohyb není možný, protože došlo k uváznutí jednoho (či více) ovládacího tlačítka polohování nebo polohovacího joysticku.	Se sloupem nehýbejte, dokud veškeré případné překážky neodstraníte.
H144		Vertikální pohyb není možný, protože došlo k uváznutí jednoho (či více) ovládacího tlačítka polohování.	Uvolněte dané tlačítko/ joystick.
H148		Vertikální pohyb není možný. Podpěrný stolek pacienta je umístěn příliš vysoko.	Stiskněte tlačítko pro snížení rentgenového přístroje a přesuňte podpěrný stolek pacienta do nižší polohy.
H149		Vertikální pohyb byl zastaven z důvodu nedostatku prostoru pro další snížení C-ramene.	Než budete pokračovat, odstraňte veškeré překážky.
H150		Vertikální pohyb byl zastaven z důvodu nedostatku prostoru pro další snížení podpěrného stolku pacienta.	Než budete pokračovat, odstraňte veškeré překážky.
H151	Síťové napětí	Síťové napětí bylo během expozice příliš nízké.	Expozice byla přerušena. Požádejte o pomoc servisního technika.
H152		Síťové napětí je příliš nízké.	Expozice není možná. Požádejte o pomoc servisního technika.
H161	Teplota	Teplota rentgenky je příliš vysoká.	Počkejte několik minut, než rentgenka vychladne.
H162		Teplota zdvižného motoru je příliš vysoká.	Počkejte několik minut, než zdvihový motor vychladne.
H163		Teplota rentgenky je příliš vysoká. Před kontrolou svazku prosím vyčkejte, než se rentgenová hlavice dostatečně ochladí.	Před kontrolou svazku vyčkejte, než se rentgenová hlavice dostatečně ochladí.
H165		Teplota rentgenové hlavice je příliš vysoká pro zvolené expoziční hodnoty.	Počkejte několik minut, než rentgenka vychladne.
H166		Maximální energetická úroveň rentgenové hlavice byla překročena.	Čekejte, dokud se rentgenová hlavice v průběhu několika minut neochladí, nebo použijte nižší expoziční hodnoty.
H170	Zprávy související s uživatelem	Nesprávný licenční kód.	Ověřte licenční kód.
H171		Snímač není řádně připojen k C-rameni.	Připojte a/nebo zajistěte polohu snímače.
H172		Snímač není řádně spojen s kefalostatem.	Připojte a/nebo zajistěte polohu snímače.
H175		Zvolený program v aplikaci Romexis je v rozporu se zvoleným programem rentgenového přístroje.	Vyberte v aplikaci Romexis jiný expoziční mód.

Kód	Vysvětlení	Poznámky
H180	Volba programu v PC je v rozporu se zvoleným programem rentgenového přístroje	
H181	Proces snímkování byl zrušen ze strany aplikace Romexis.	
H182	Vypršení maximálního času odezvy během přenosu obrazových dat.	Expozice byla přerušena. Požádejte o pomoc servisního technika.
H183	Připojení snímač není pro zvolený program vhodný.	Použijte jiný snímač.
H184	Odpojte 3D snímač.	
H185	3D snímač není řádně připojen.	Připojte a/nebo zajistěte polohu snímače.
H186	3D sensor nemá určenu IP adresu.	
H187	Problém během přenosu obrazových dat.	Expozice byla přerušena. Požádejte o pomoc servisního technika.
H189	Došlo k interakci s dotykovou obrazovkou během pořizování expozice.	Expozice byla přerušena.
H190	Chybný unikátní identifikátor (UID) komunikačního protokolu!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H191	Chybný stav komunikačního protokolu!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H192	Příkazová fronta je plná!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H193	Neplatné nastavení skenu.	Zkuste pokus opakovat, případně požádejte o pomoc svého servisního technika.
H194	Spojení s rentgenem nebylo navázáno!	Provoz v samostatném režimu.
H195	Vypršel limit prodlevy požadavku při čekání na odpověď rentgenového přístroje!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H196	Neshoda verzí komunikačních rozhraní!	Aktualizujte software rentgenového přístroje.
H197	Chyba při čtení z paměti EEPROM!	Zkuste pokus opakovat, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.

Kód	Vysvětlení		Poznámky
H198	Nekompatibilní komponenty	U rekonstrukčního PC nebyla detekována grafická karta!	Zkuste restartovat rekonstrukční PC, v případě přetrvávajícího problému kontaktujte technickou podporu.
H199		PC pro 3D rekonstrukci nepodporuje algoritmus CALM	Aktualizujte PC pro 3D rekonstrukci nebo deaktivujte licenci funkce CALM. Požádejte o pomoc servisního technika.

11 Chybové zprávy



POZNÁMKA

V případě výskytu chybové zprávy kontaktujte servisního technika.



Rentgenový přístroj je vybaven funkcí automatické kontroly, která monitoruje provoz přístroje. Pokud systém odhalí technickou závadu, na dotykové obrazovce se zobrazí chybová zpráva (např. E201).

Chybová zpráva znamená, že v přístroji nastala chyba, která musí být před další expozicí odstraněna. Dokud není chybová zpráva z dotykové obrazovky odstraněna, rentgenový přístroj od uživatele nebude přijímat žádné příkazy. Odved'te pacienta z dosahu rentgenového přístroje. Poté zprávu odstraňte stisknutím symbolu zeleného zatržítka.

12 Čištění a dezinfekce

Informace o čisticích a desinfekčních prostředcích schválených výrobcem naleznete v dokumentu *Desinfekce schválené společností KaVo*. Dokument lze získat prostřednictvím webových stránek společnosti KaVo.

POZNÁMKA

Před čištěním a dezinfekcí přístroj vypněte.

POZNÁMKA

Používejte čisticí prostředky a povrchové desinfekce schválené výrobcem. Produkty jsou zde rozděleny do kategorií jako čisticí nebo desinfekční prostředky podle informací od jejich výrobců.

POZNÁMKA

Postupujte podle pokynů výrobce čisticího prostředku, desinfekčního prostředku a autoklávu.

POZNÁMKA

PRO SPREJE, KAPALINY A PĚNY:

Neaplikujte spreje, kapaliny a pěny přímo na povrchy. Naneste je v malém množství na čistý měkký hadřík a otřete jím povrch.


Pokud se do systému dostane sprej, kapalina či pěna, kontaktujte servisního technika.

12.1 Opěrky pacienta, madla pro pacienta a dotyková obrazovka


Po každém pacientovi otřete tyto části za použití povrchové desinfekce.

V případě potřeby použijte prostředek schválený výrobcem k čištění skvrn a znečištění.

3D opěrky pacienta

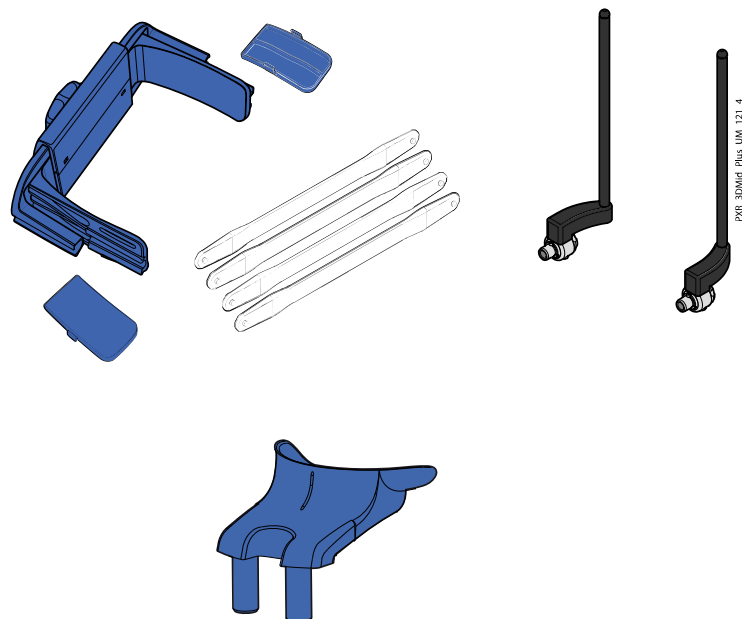


Panoramatické opěrky pacienta

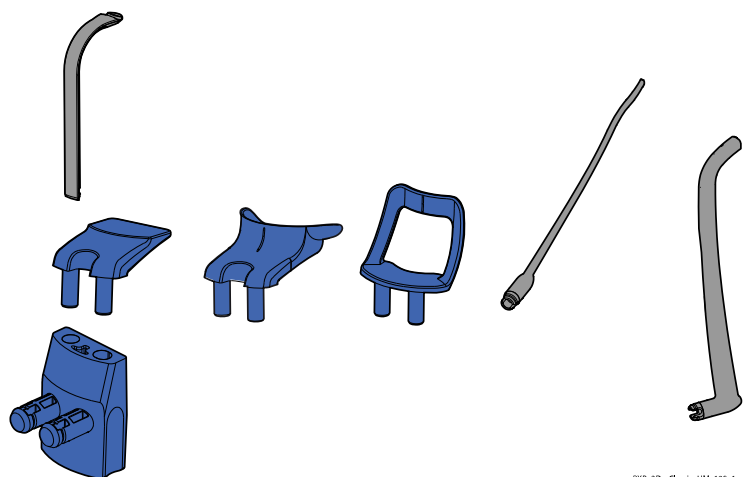


PXR_3DLC_Classic_ILM_120_1.eps

Kefalometrické opěrky pacienta

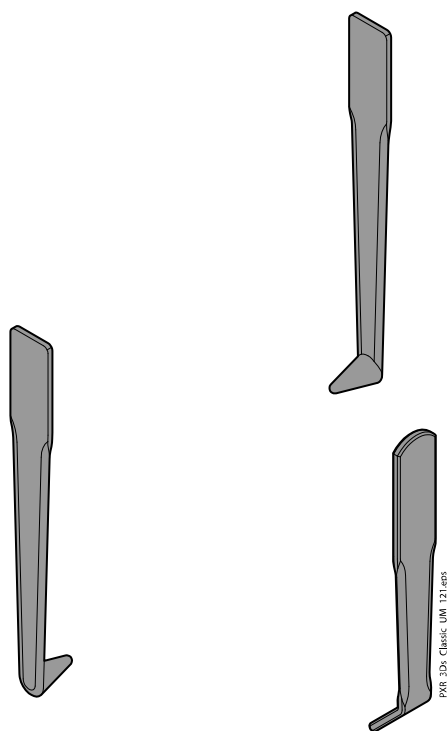


PXR_3DLC_Classic_ILM_121.eps

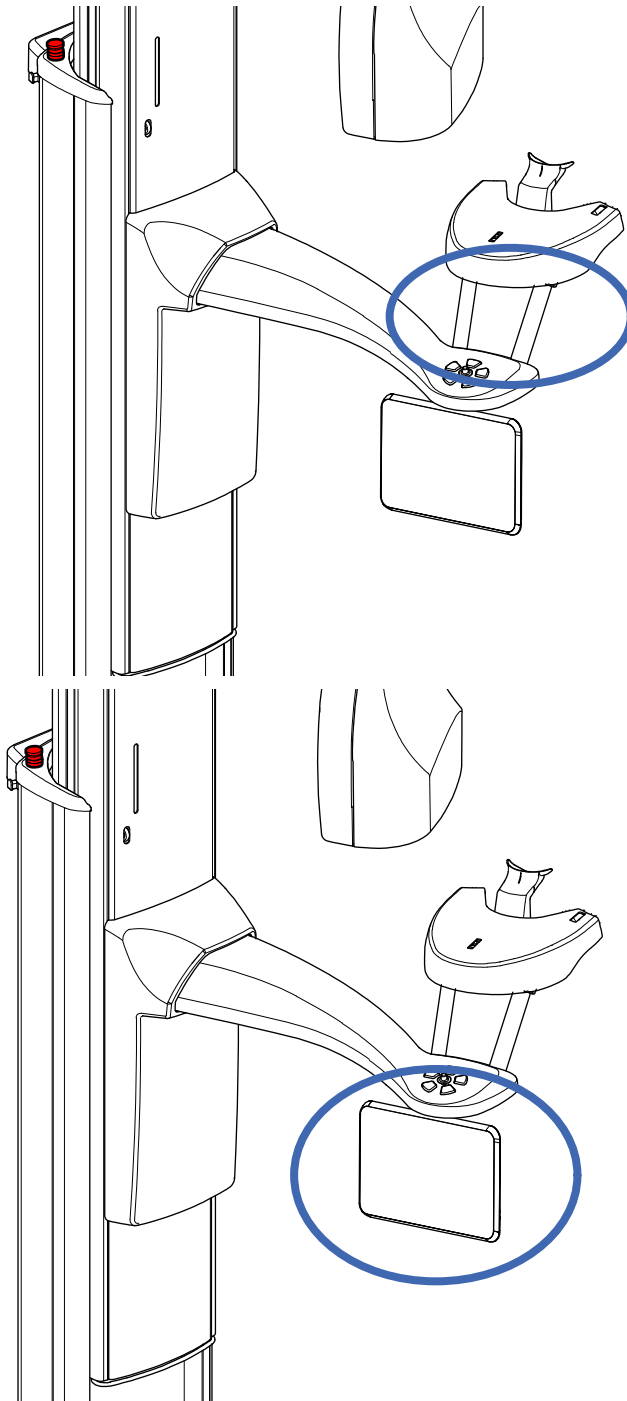Madla pro pacienta a dotyková obrazovka

POZNÁMKA

PÁSOVÁ OPĚRKA HLAVY 25:


Otřete pásovou opěrkou hlavy po každém použití pacientem pomocí šetrného čisticího prostředku a měkkého hadříku. Nepoužívejte desinfekce.

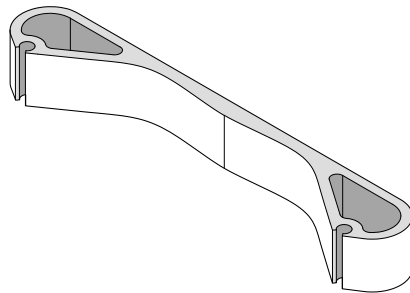

12.2 Ostatní povrchy


Ostatní povrchy pravidelně otírejte dezinfekčním prostředkem na povrchy schváleným výrobcem.

V případě potřeby použijte čisticí prostředek schválený výrobcem k čištění skvrn a znečištění.

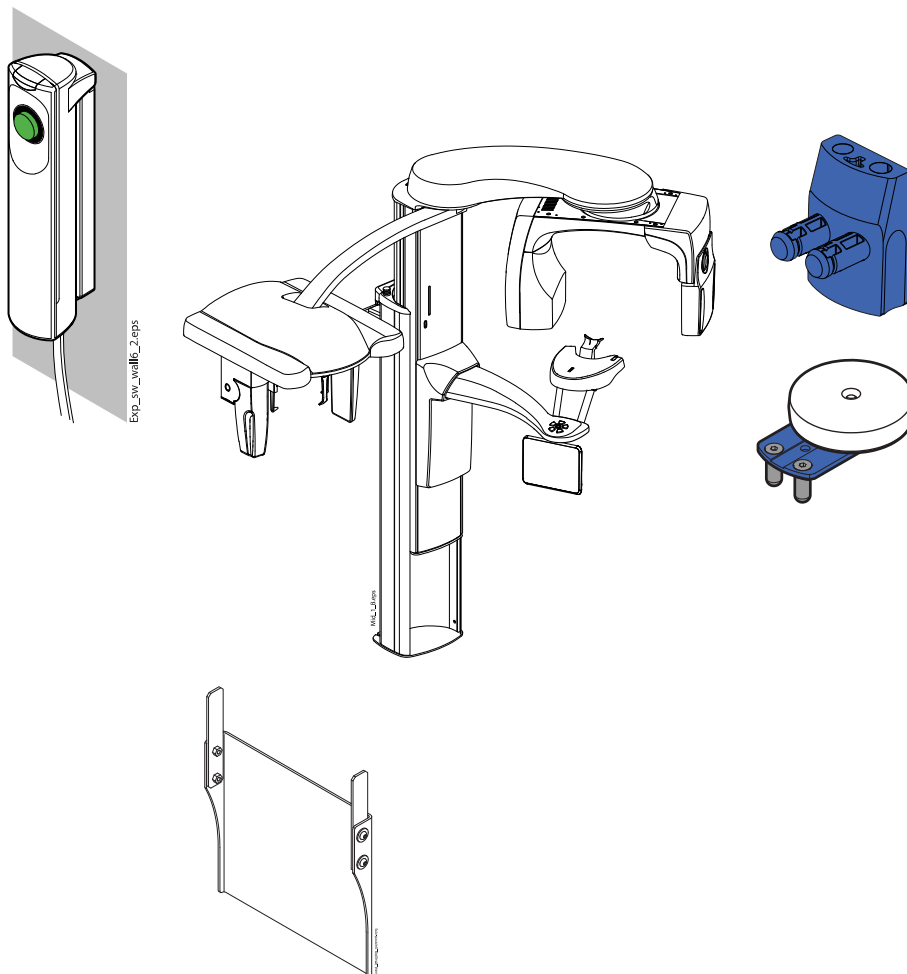

POZNÁMKA

Díly na obrázku níže lze sterilizovat v autoklávu při 134 °C (273 °F). Díly lze podrobit až 100 sterilizačním cyklům v autoklávu.

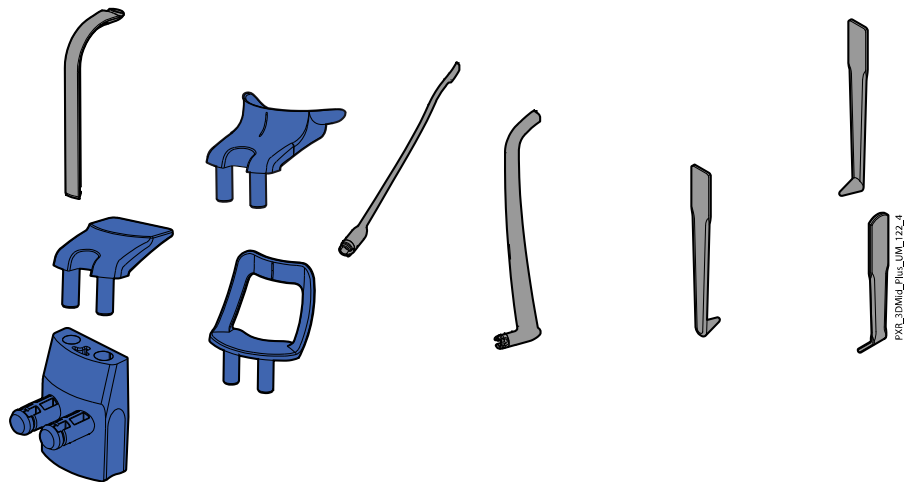

13 Servis

Rentgenový přístroj musí být po každých 10 000 expozicích, příp. jednou za rok (podle toho, co nastane dříve), podroben prohlídce kvalifikovaným servisním technikem společnosti KaVo. Tím bude zajištěna bezpečnost pacientů a uživatelů a konzistentní kvalita snímků.

Každoroční servisní prohlídka zahrnuje kontrolu následujících prvků:

- Seřízení rentgenového přístroje a kontroly v rámci řízení kvality
- Aktualizace datové bezpečnosti
- Expoziční tlačítko
- Indikační světla a varovné signály užívané během expozice
- Nouzový vypínač
- Matice motoru sloupu
- Popisky

Technické služby KaVo

V případě jakýchkoli dotazů nebo stížností kontaktujte Technické služby KaVo:

+49 (0) 7351 56-2900

service.xray@kavo.com

14 Záruční podmínky

Společnost KaVo poskytuje koncovému zákazníkovi záruku, že produkt uvedený v předávacím protokolu bude řádně fungovat a nevykáže žádné výrobní vady nebo vady materiálu po dobu 12 měsíců od data instalace, a to za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Pokud bude uvědoměna o oprávněných reklamacích spojených s vadou produktu nebo jeho neúplnou dodávkou, společnost KaVo naplní svůj záruční závazek tím, že produkt bez dalších úhrad nahradí, nebo jej opraví, dle volby společnosti KaVo. Jiné reklamace jakékoli podstaty, zejména s ohledem na kompenzaci, jsou vyloučeny. V případě implicitní a hrubé nedbalosti nebo úmyslu platí výše uvedené naopak pouze při absenci závazných právních předpisů.

Společnost KaVo nenese odpovědnost za vady a jejich důsledky způsobené přirozeným opotřebením, nesprávným čištěním nebo servisním zásahem, nedodržením pokynů ohledně servisu, provozu či připojení, kalcifikací nebo korozí, přívodem znečištěného vzduchu nebo vody nebo chemickými či elektrickými faktory, které jsou dle výrobních specifikací považovány za abnormální či nepřípustné.

Záruka se obvykle nevztahuje na žárovky, sklo, pryžové části, software, koncovky skeneru, baterie, trubice, šrouby, matice a jiné upevňovací prvky, paměťové fólie a barevnou stálost plastů.

Vady nebo jejich důsledky, které lze přičítat zásahům či změnám produktu uskutečněným zákazníkem nebo třetí stranou jsou ze záruky vyloučeny.

Záruční reklamace lze uplatnit pouze tehdy, když je předávací protokol (kopie) patřící k produktu zaslána společnosti KaVo a provozovatel nebo uživatel předloží originál dokumentu.

Výjimky ze standardní záruky

- Na produkt KaVo ProXam iS (pouze senzory) se vztahuje záruka po dobu 36 měsíců od data odeslání.
- Veškeré upgrady softwaru Romexis® jsou k dispozici zdarma po dobu 12 měsíců od data aktivace licence. Upgrade nezahrnuje nové, samostatně instalované moduly nebo významné nové vlastnosti či významné nové funkce.
- Na počítače Dell objednané od společnosti KaVo je poskytována dvouletá záruka se servisem u zákazníka od společnosti Dell. Pro aktivaci záruky je vyžadována registrace.
- Sady pro dovybavení se vyrábí na zakázku a tudíž vratky nejsou akceptovány.
- Na součásti, které lze sterilizovat v autoklávu, se nevztahuje záruka v případě jejich poškození procesem sterilizace.

15 Likvidace

Aby byl snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu produktu, jsou naše produkty navrženy takovým způsobem, aby byla jejich likvidace maximálně bezpečná. Produkty splňují požadavky směrnic RoHS, REACH a OEEZ.

Za likvidaci zastaralých přístrojů odpovídá vlastník odpadního zařízení. Při manipulaci s odpadními produkty je nutné vzít v úvahu možná rizika a podniknout nezbytná bezpečnostní opatření.

Recyklovatelné díly je po odstranění nebezpečného odpadu vždy nutné odevzdat do příslušných zpracovatelských středisek. Všechny díly a komponenty obsahující nebezpečné materiály musí být zlikvidovány v souladu s legislativou týkající se odpadů a podle pokynů vydaných místními úřady pro ochranu životního prostředí.

Následující díly obsahují nebezpečný odpad:

- RTG trubice (olovo, minerální olej)
- Kolimátory (olovo)
- Zobrazovací senzory a zadní kryty senzorů (olovo)

Baterie musí být zlikvidovány podle požadavků směrnice 2006/66/EHS a v souladu s legislativou týkající se odpadů a podle pokynů vydaných místními úřady pro ochranu životního prostředí.

Následující díly mohou obsahovat baterie:

- Desky plošných spojů

POZNÁMKA

POČÍTAČ PRO 3D REKONSTRUKCE

Před likvidací odstraňte z pevného disku veškerá data pacientů. Použijte speciální software, který čistí média nebo fyzicky zničí pevný disk.

16 Technické údaje

Klasifikace	
Nařízení o zdravotnických prostředcích	93/42/EEC (Třída IIb)
RoHS	2011/65/EU
IEC 60601-1	Třída I, typ B
CISPR 11	Třída B
Stupeň krytí (IP)	IP20
Příložná část (dle ČSN EN IEC 60601-1: 2012)	
Opěrky pacienta	Viz část Opěrky pacienta v Návodu k použití
Madla pro pacienta	
Generátor (dle IEC 60601-2-7: 1998)	
	Rezonanční režim, DSP řadič, 80–160 kHz
RTG trubice	
2D/3D/3DQ	D-054SB
Velikost ohniska (dle IEC 60336: 2005)	
2D/3D/3DQ	0,5 x 0,5 mm
Filtrace	
Panoramatické/Kefalometrické	Celkem 2,5 mm Al
3D	Celkem 2,5 mm Al + 0,5 mm Cu
SmartPan	Celkem 2,5 mm Al
Filtrace ekvivalentní kvalitě předního krytu pouzdra lampy (není zahrnuta ve specifikované celkové filtraci)	0,3 mm Al při 70 kV / polovrstva (HVL) 2,6 mm Al
Anodové napětí	
Panoramatické/SmartPan	60 až 84 kV ± 5 %
Ceph (Kefalometrické)	60 až 84 kV ± 5 %
3D nebo 3DQ	60 až 90 kV ± 5 %
Anodový proud	
Pan (Panoramatické)	1 až 16 mA ±10 %
Ceph (Kefalometrické)	1 až 16 mA ±10 %
3D/3DQ	
	3D: 1 až 14 mA ±10 %
	Panoramatické/SmartPan: 1 až 16 mA ±10 %
	Kefalometrické skenování: 1 až 16 mA ±10 %
mAs rozsah	
	min./max. dle vyznačení ± (10% + 0,2 mAs)
mGy rozsah	
	min./max. dle vyznačení ± 35%
Linearita vyzářeného výkonu	
	< 0,1
Doba chlazení	

	Řízena automaticky
Expoziční čas	
Pan (Panoramatické)	2,7 až 16 s dle indikace $\pm 10\%$
SmartPan	2,5 až 15,6 s dle indikace $\pm 10\%$
Kefalometrické skenování	6,7 až 10,5 s dle indikace $\pm 10\%$
3D	Pulzní, efektivní 3 až 36 s dle indikace $\pm 10\%$
SID	
Pan (Panoramatické)	<ul style="list-style-type: none"> • 2D/3D: 501 mm (19,7") • 3DQ: 574 mm (22,6")
Ceph (Kefalometrické)	1700 mm (66,9")
3D/SmartPan	<ul style="list-style-type: none"> • 3D: 528 mm (20,7") • 3DQ: 600 mm (23,6")
Zvětšení	
Pan (Panoramatické)	<ul style="list-style-type: none"> • 2D/3D: 1,2 až 1,5 • 3DQ: 1,4
SmartPan	<ul style="list-style-type: none"> • 3D: 1,27 • 3DQ: 1,4
Ceph (Kefalometrické)	1,13
3D	<ul style="list-style-type: none"> • 3D: 1,58 • 3DQ: 1,38, 1,40, 1,42, 1,43 nebo 1,8
Pracovní cyklus pro nastavení výšky	
	25 s zapnuto / 400 s vypnuto
Síťové napětí	
	100 až 220 V~ / 50 až 60 Hz
	230 až 240 V~ / 50 Hz
Síťový proud	
	8 až 17 A
Vyšší harmonické	
	Cos lepší než 0,9
Max. přípustná zdánlivá impedance napájení	
	0,5 Ω (100 VAC)
Max. soustavné odvádění tepla	
	250 W
Interní pojistky	
Vyměnitelné uživatelem	100 až 220 V~ / 16A FF H 500 V 230 až 240 V~ / 8A FF H 500 V
Typ	195100 ELU
Externí pojistky	
	100 až 220 V ~ / 16A min. až 20A max. T 250 V 230 až 240 V ~ / 10A min. až 20A max. T 250 V
Baterie	

	Lithiová baterie: CR2032, Varta/Panasonic
Max. hmotnost	
2D/3D	119 kg (262 lb)
3DQ	141 kg (311 lb)
Kefalometrické skenování	26 kg (57 lb)
Požadavky na okolí	
Přeprava:	
Teplota	-20°C až +60°C (-4°F až +140°F)
Relativní vlhkost	10 až 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Tlak vzduchu	700 až 1060 hPa
Skladování:	
Teplota	-10°C až +50°C (+14°F až +122°F)
Relativní vlhkost	10 až 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Tlak vzduchu	700 až 1060 hPa
Provoz:	
Teplota	Panoramatické/Kefalometrické snímkování: +10°C až +40°C (+50°F až +104°F)
Relativní vlhkost	10 až 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Tlak vzduchu	800 až 1060 hPa
Max. nadmořská výška	2000 m (1,25 miles)
Vlastnosti snímku	
Pan/kef CCD čip	
Velikost pixelu	48 µm
Aktivní plocha panoramatického snímku	6 x 146 mm (0,24 x 5,74")
Aktivní plocha kefalometrického snímku	6 x 292 mm (0,24 x 11,15")
3D:	
Velikost pixelu plochého panelu	127 µm
Aktivní plocha plochého panelu	<ul style="list-style-type: none"> • 3D: 130 x 130 mm (5,12 x 5,12") • 3DQ: 146 x 146 mm (5,74 x 5,74")
SmartPan:	
Velikost pixelu plochého panelu	127 µm
Aktivní plocha plochého panelu	<ul style="list-style-type: none"> • 3D: 8 až 25 x 130 mm (0,31 až 0,98 x 5,12 palců) • 3DQ: 8 až 25 x 146 mm (0,31 až 0,98 x 5,74 palců)

Původní výrobce

Planmeca Oy, Asentajankatu 6, FIN-00880, Helsinki, Finsko

Telefon: +358 20 7795 500, Fax: +358 20 7795 555, www.planmeca.com**Distribuce**

KaVo Dental GmbH, Bismarckring 39, 88400 Biberach, Německo

Telefon: +49 7351 56-0, Fax: +49 7351 56-1488

